



AcuEar Pebble 2

Systeme audio personnel
Bluetooth

Avec microphone de boîtier



Guide Utilisateur Interactif

Version 1.9.2

Démarrer la configuration

< Retour



Menu Principal

1. Avant de Commencer
2. Boutons & Indicateurs
3. Comment Charger
4. Comment Porter
5. Utiliser comme Système audio personnel
 - a. Pour conversation à courte portée
 - b. Pour la capture de voix à distance
6. Utiliser comme Écouteurs Bluetooth
7. FAQ & Dépannage
8. Obtenir de l'Aide & Mises à Jour

Suivant

1. Avant de commencer

Systeme audio personnel Bluetooth à oreille ouverte avec microphone intégré

- **Utilisez le microphone du boîtier** pour capturer les voix et les transmettre aux écouteurs.
- **Changer de mode** : Normal pour les endroits calmes, Bruyant pour les endroits bruyants.
- **Utilisez comme écouteurs Bluetooth** pour la musique et les appels.

[Suivant](#)

Cela a-t-il été utile ?



2. Boutons & Indicateurs



① Mode Système audio personnel

Ouvrir le boîtier : les écouteurs se connectent automatiquement au **micro du boîtier**.

② Mode Bluetooth

Maintenir le bouton  pendant 6s pour désactiver le micro. → Les écouteurs entrent en mode appairage Bluetooth.

③ Changement d'Environnement

Normal : faible latence en lieux calmes

Bruyant : parole plus claire dans les endroits bruyants

Suivant



3. Comment charger

⚠ Retirez le film avant de charger.

- Utilisez un câble USB-C (5V, 1A~2.4A)
- Charge : LED **fixes rouges** (écouteurs)
- Charge complète : LED s'éteignent **éteint** (~2,5 h)
- Autonomie :
Micro du boîtier : jusqu'à 10 h
Écouteurs : jusqu'à 10 h avec le boîtier
Jusqu'à 18 h (Bluetooth)

[Suivant](#)

Cela a-t-il été utile ?



< Retour



Menu

4. Comment porter

Mettez le crochet d'oreille le long du contour de votre oreille.



Suivant

Cela a-t-il été utile ?



5. Utiliser comme Système audio personnel

5.1 Connecter les écouteurs au micro

- 1 Ouvrir le boîtier, boîtier micro auto-allumé.
 - 2 Attendre 3s. LED du boîtier = **blanc fixe**, LED des écouteurs = **bleu fixe**, puis éteint.
- ✓ Les écouteurs se connectent au micro du boîtier.




Suivant

Cela a-t-il été utile ?



5.2a Pour la conversation à courte distance

- 1 L'intervenant tient le micro de la caisse.
- 2 L'auditeur porte les écouteurs.
- 3 Changer de mode :
 - Utilisez **Normal** dans les endroits calmes pour une faible latence. (Micro **<...1,5 m...>** Haut-parleur)
 - Utilisez **Bruyant** dans les endroits bruyants pour entendre clairement la parole. (Micro **<...40 cm...>** Haut-parleur)

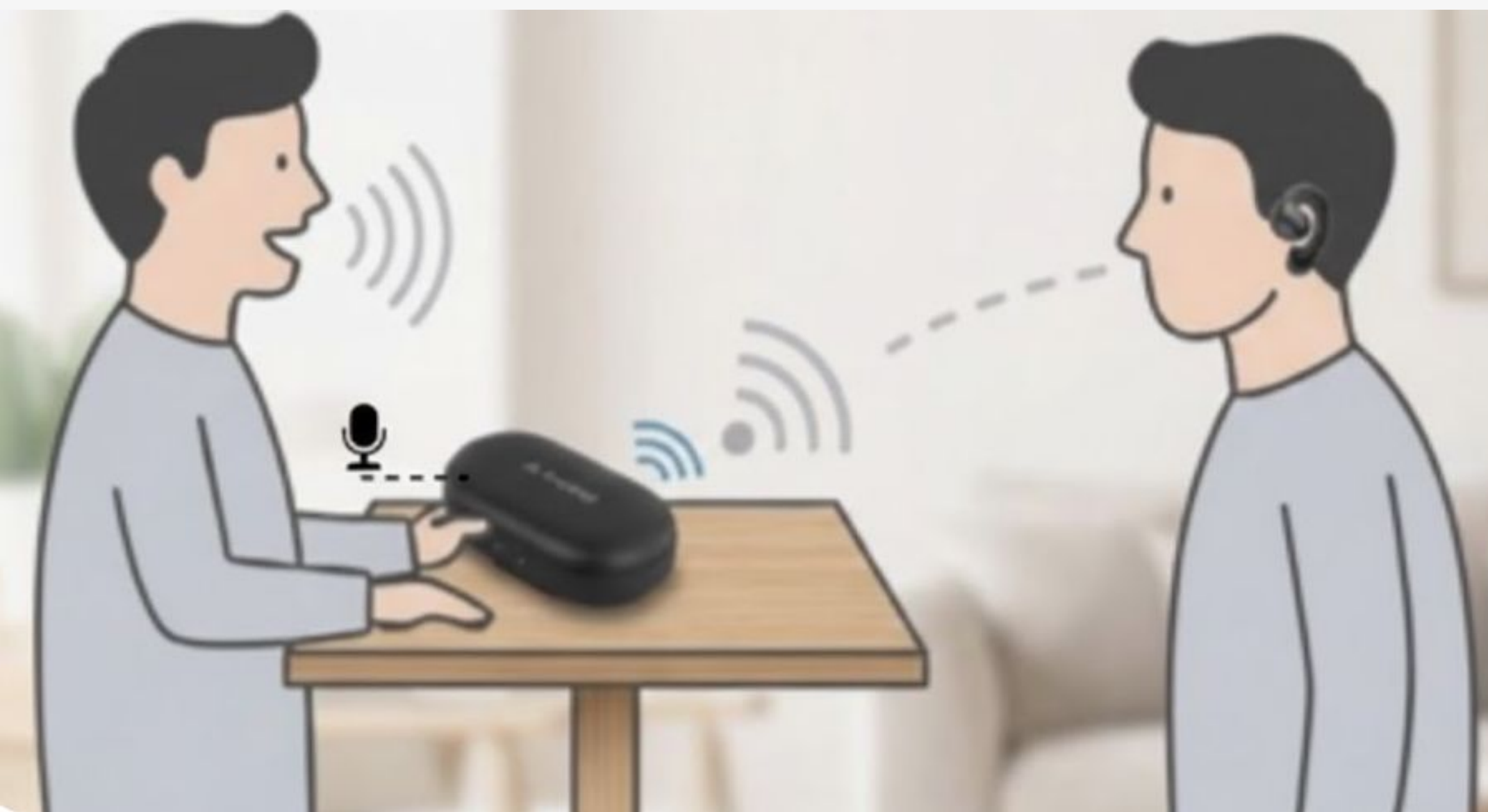[Suivant](#)

Cela a-t-il été utile ?



5.2b Pour la prise de voix à distance

- 1 Placez le micro de l'étui sur le pupitre.
- 2 L'auditeur porte les écouteurs.
- 3 Changez de mode :
 - Utilisez **Normal** dans les endroits calmes pour une faible latence. (Micro <...1,5m...> Haut-parleur)
 - Utilisez **Bruyant** dans les endroits bruyants pour entendre clairement la parole. (Micro <...40cm...> Haut-parleur)



Suivant

Cela a-t-il été utile ?



5.3 Ajuster le volume

Appuyez **+** / **-** sur l'oreillette gauche ou droite pour ajuster le volume.



Suivant

Cela a-t-il été utile ?



6. Utiliser comme écouteurs Bluetooth

① Entrer en mode appairage Bluetooth :

Ouvrez le boîtier, maintenez  pendant 6s pour éteindre le micro du boîtier.

→ Les écouteurs clignotent **rouge** & **bleu**.



Suivant

Cela a-t-il été utile ?





② Se connecter au téléphone/PC :

Activez le Bluetooth sur le téléphone/PC, et sélectionnez **Avantree AcuEar Pebble 2**.

✓ Connecté : LED

reste **fixe bleu** pendant 10s puis **éteindre**.

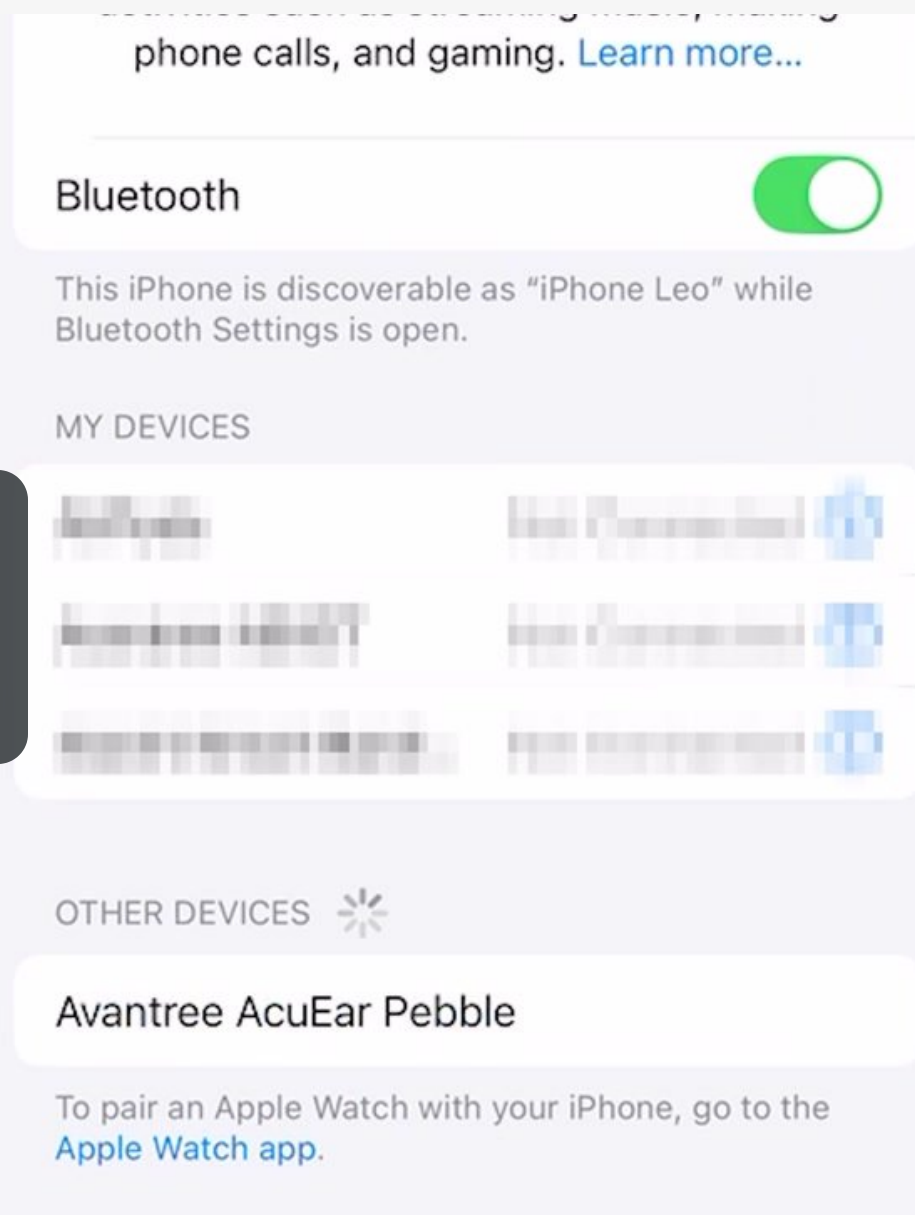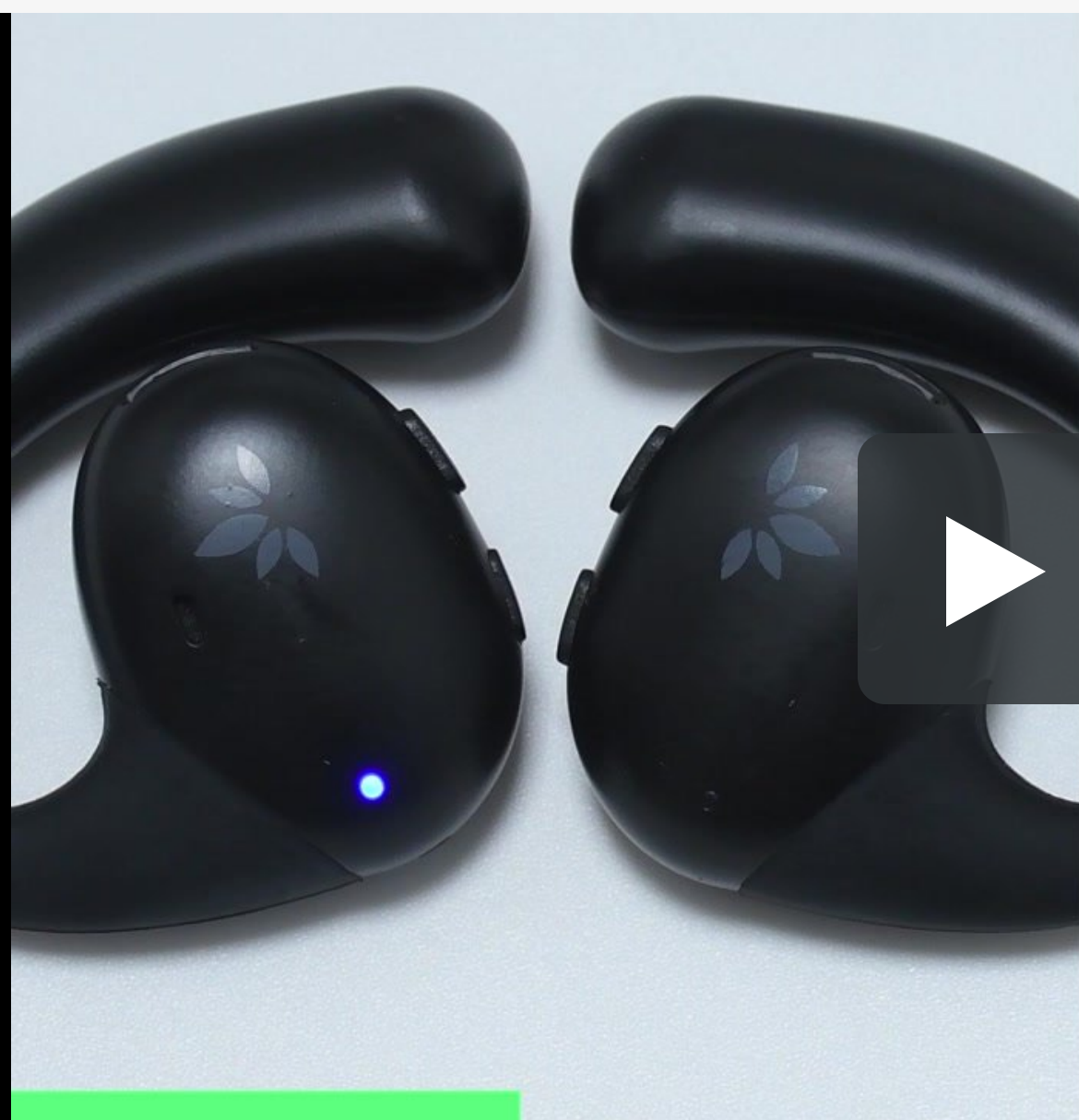

Conseils de reconnexion :

Ouvrez le boîtier et éteignez le microphone du boîtier, appuyez une fois sur +/- pour se reconnecter, ou sélectionnez l'appareil dans la liste Bluetooth.

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



7. FAQ & Dépannage

Voici quelques questions fréquentes :

- [Comment utiliser un écouteur mono ? ↗](#)
- [Comment réinitialiser le microphone de la coque et les écouteurs ? ↗](#)

[👉 Plus de dépannage & FAQ ↗](#)

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



8. Obtenir de l'aide & Mises à jour

1. Enregistrer votre produit

Extension de garantie & recevoir des mises à jour.

[Enregistrer votre produit](#)

2. Support d'agent

Besoin d'aide ? Contactez nos agents.

 [Email](#)

 [Appeler](#)

 [Chat](#)

3. Partager vos commentaires

Vos commentaires sont précieux.

 [Évaluez ce guide](#)