



AcuEar Pebble 2

Amplificatore acustico Bluetooth
Con microfono nella custodia



Guida Utente Interattiva

Versione 1.9.1

[Avvia configurazione](#)

< Indietro



Menu Principale

1. Prima di iniziare
2. Pulsanti e indicatori
3. Come caricare
4. Come indossare
5. Usare come amplificatore acustico
 - a. Per conversazioni a distanza ravvicinata
 - b. Per la ricezione di voce a distanza
6. Usare come auricolari Bluetooth
7. FAQ e risoluzione dei problemi
8. Assistenza e aggiornamenti

Avanti



1. Prima di iniziare

Amplificatore acustico Bluetooth con microfono nel case

- **Usa il microfono nel case** per catturare le voci e inviarle alle cuffie.
- **Cambia modalità:** Normale per ambienti silenziosi, Rumoroso per ambienti rumorosi.
- **Usa come cuffie Bluetooth** per musica e chiamate.

Avanti

È stato utile?




2. Pulsanti & Indicatori



Modalità Amplificatore Udito

Apri la custodia: gli auricolari si connettono automaticamente al **microfono della custodia**.

② Modalità Bluetooth

Tieni premuto il pulsante  per 6s per spegnere il microfono. → Gli auricolari entrano in modalità di associazione Bluetooth.

③ Cambio Ambiente

Normale: bassa latenza in luoghi silenziosi

Rumoroso: parlato più chiaro in luoghi rumorosi

Avanti

È stato utile?



3. Come Caricare

⚠️ Rimuovi la pellicola prima di caricare.

- Usa un cavo USB-C (5V, 1A~2.4A)
- Caricamento: LED **fissi rosso** (auricolari)
- Carica completa: LED si spengono **off** (~2,5 ore)
- Tempo di riproduzione:
Microfono della custodia: fino a 10 ore
Auricolari: fino a 10 ore con custodia
Fino a 18 ore (Bluetooth)



Avanti

È stato utile?



< Indietro



Menu

4. Come indossare

Indossa l'uncino dell'orecchio lungo il contorno dell'orecchio.



Avanti

È stato utile?



5. Usare come amplificatore acustico

5.1 Connetti le cuffie al microfono

- 1 Apri il case, case microfono auto-accensione.
 - 2 Attendi 3s. LED del case = **solido bianco**, LED delle cuffie = **blu fisso**, poi spento.
- ✓ Le cuffie si collegano al microfono del case.




Avanti

È stato utile?



5.2a Per conversazioni a distanza ravvicinata

- 1 L'altoparlante tiene il microfono.
- 2 L'ascoltatore indossa le cuffie.
- 3 Cambia modalità:
 - Usa **Normale** in ambienti silenziosi per bassa latenza. (Microfono <...1,5m...> Altoparlante)
 - Usa **Rumoroso** in ambienti rumorosi per ascoltare chiaramente la voce. (Microfono <...40cm...> Altoparlante)

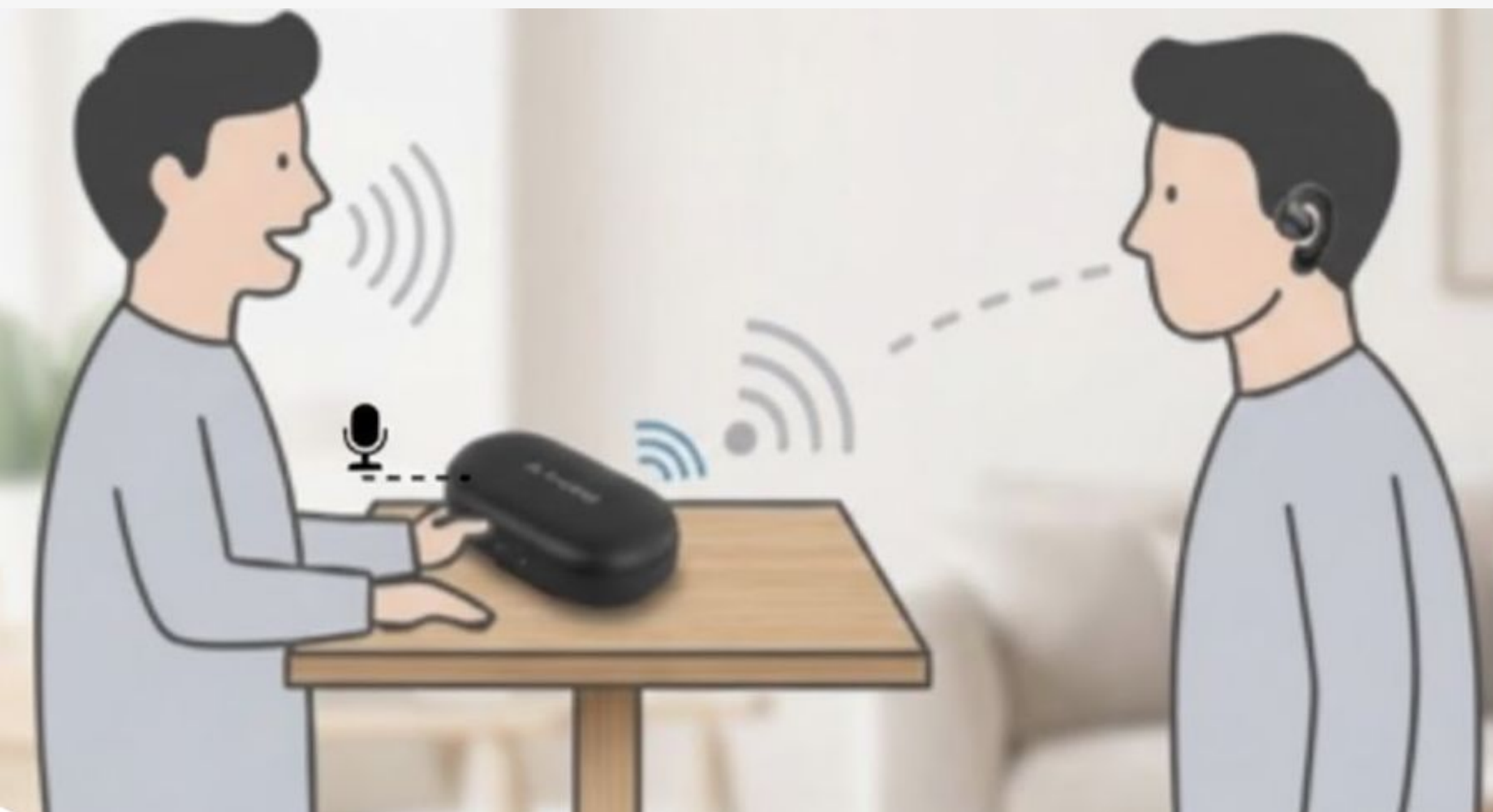


Avanti

È stato utile?



5.2b Per la captazione vocale a distanza

- 1 Posiziona il microfono del caso sul podio.
- 2 L'ascoltatore indossa le cuffie.
- 3 Cambia modalità:
 - Usa **Normale** in ambienti silenziosi per bassa latenza. (Microfono <...1,5m...> Altoparlante)
 - Usa **Rumorosi** in ambienti rumorosi per ascoltare chiaramente la voce. (Microfono <...40cm...> Altoparlante)

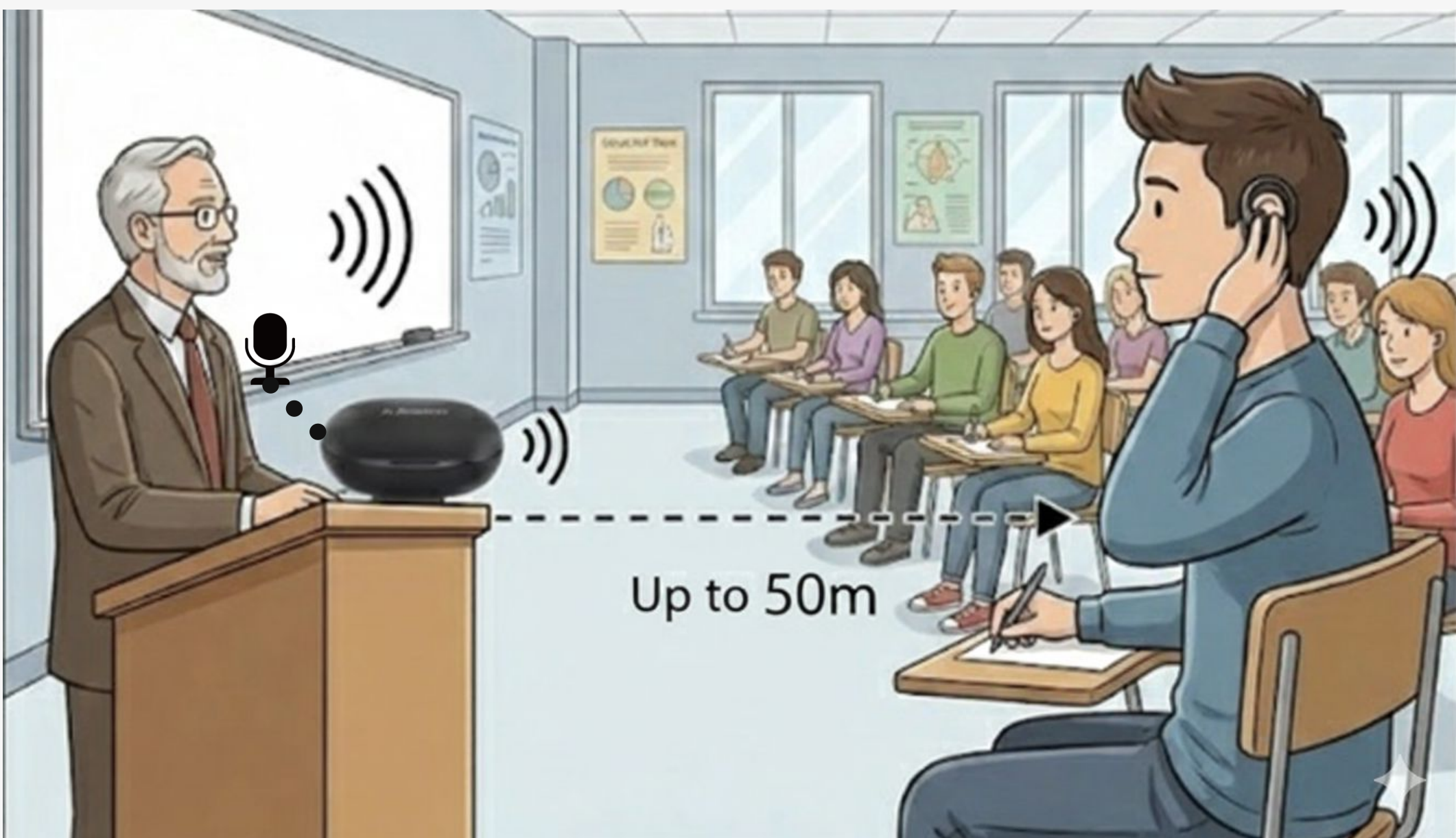

Avanti

È stato utile?



5.3 Regola il volume

Premi **+** / **-** sul lato sinistro o destro delle cuffie per regolare il volume.



Avanti

È stato utile?



6. Usa come auricolari Bluetooth

① Inserisci l'abbinamento Bluetooth:

Apri il case, tieni  per 6s per spegnere il microfono del case.

→ Le cuffie lampeggiano **rosso** & **blu**.



Avanti

È stato utile?





② Connetti a Telefono/PC:

Accendi il Bluetooth sul telefono/PC, e seleziona **Avantree AcuEar Pebble 2**.

✓ Connesso: LED

rimane **solido blu** per 10s poi **spento**.

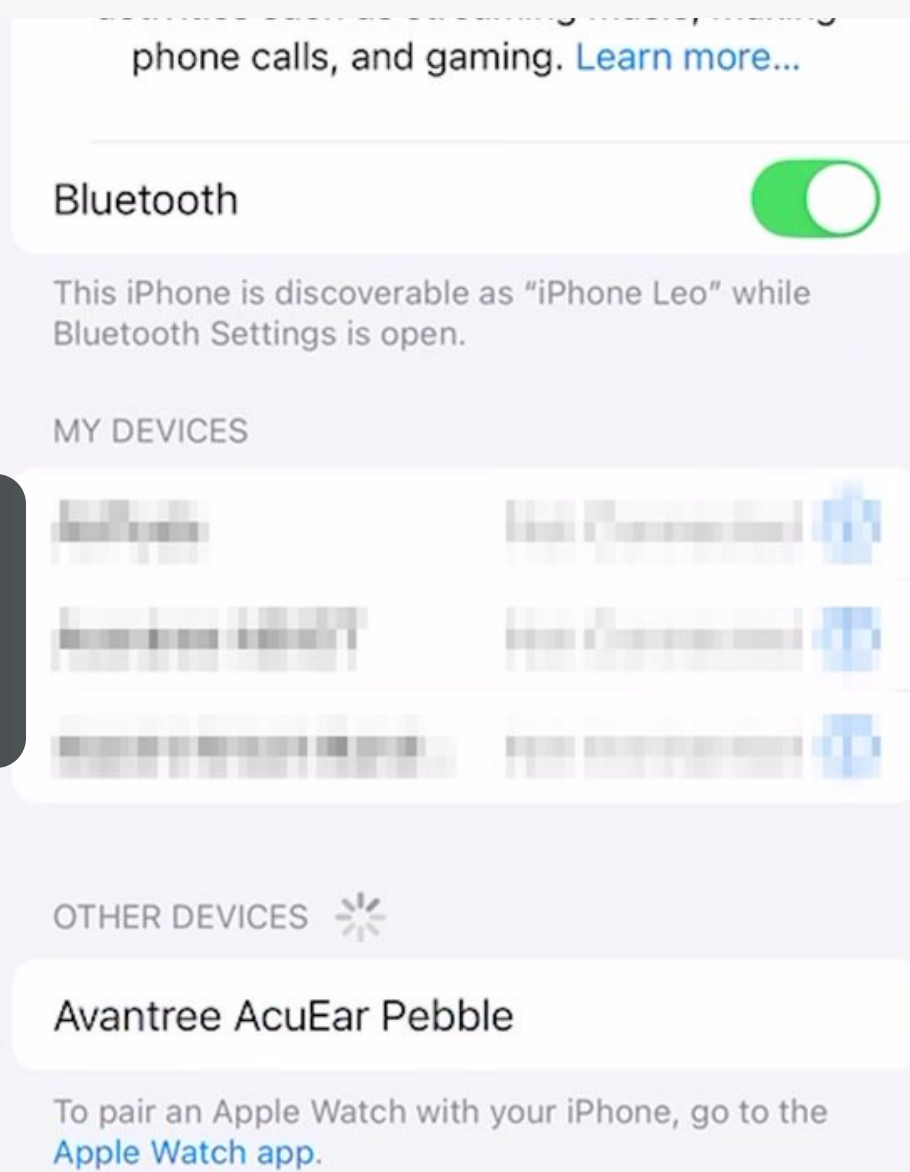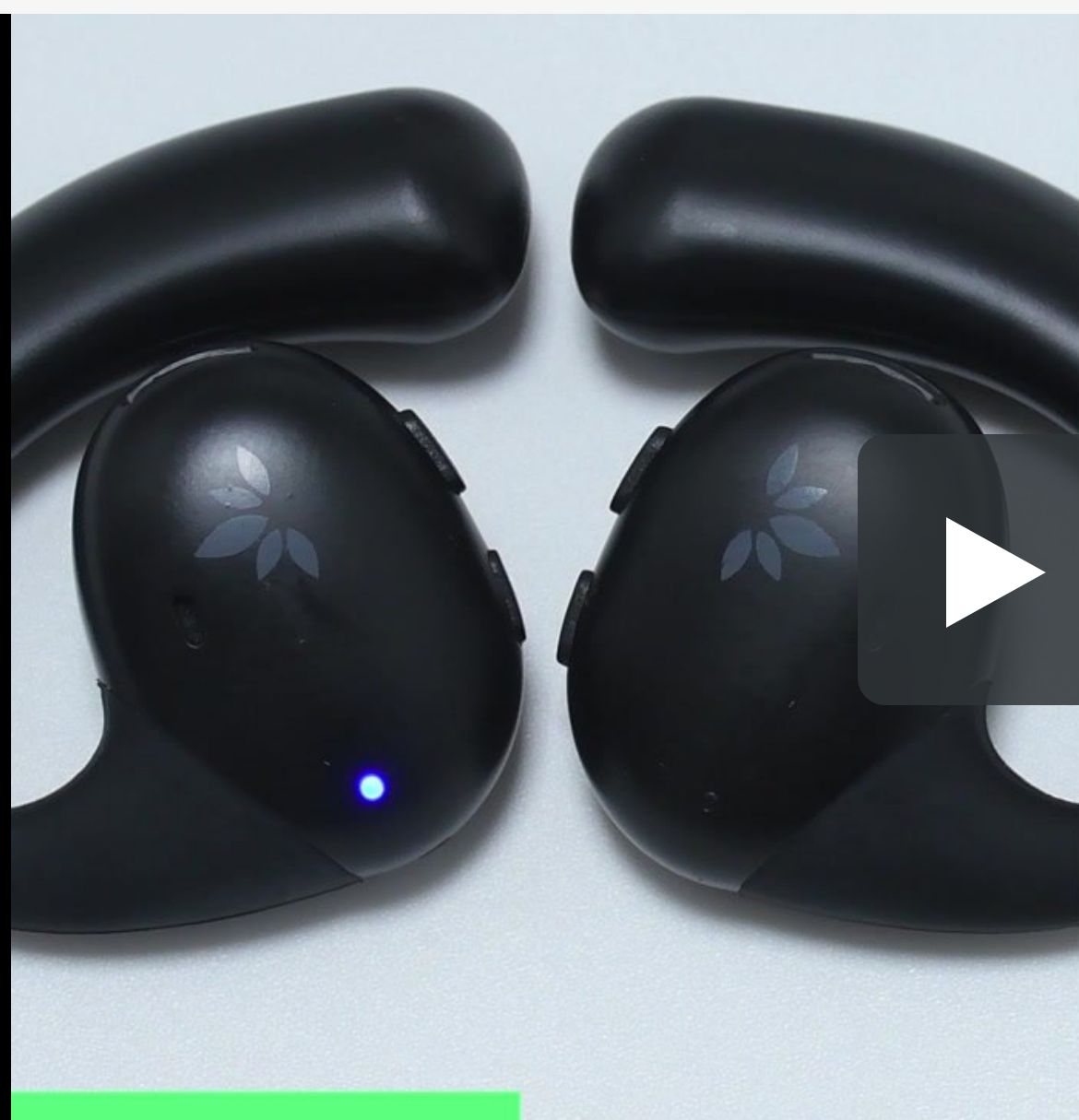

Suggerimenti per riconnettersi:

Apri il case e spegni il microfono del case, premi +/- una volta per riconnettere, o seleziona il dispositivo dalla lista Bluetooth.

Avanti

È stato utile?



7. Domande frequenti & Risoluzione dei problemi

Ecco alcune domande frequenti:

- [Come usare un auricolare mono? ↗](#)
- [Come resettare il microfono e le cuffie del case? ↗](#)

 [Ulteriori risoluzioni dei problemi & FAQ ↗](#)

Avanti

È stato utile?





8. Ottieni Aiuto & Aggiornamenti

1. Registra il tuo prodotto

Estensione della garanzia & ricevi aggiornamenti.

[Registra il tuo prodotto](#)

2. Supporto agenti

Hai bisogno di aiuto? Contatta i nostri agenti.

 Email  Chiamata  Chat

3. Condividi feedback

Il tuo feedback è prezioso.

 [Valuta questa guida](#)