



# Audikast 4HA

Auracast TV-Sender  
für Hörgeräte




## Interaktives Benutzerhandbuch

Version 2.3



Ersteinrichtung

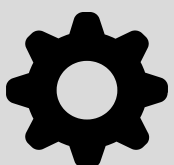

Fehlerbehebung

< Zurück



# Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen
2. Ton vom Fernseher holen
3. Fernsehlautsprecher auf PCM einstellen
4. Mit Hörgeräten verwenden
5. Mit Bluetooth-Kopfhörern verwenden
6. Erweiterte Einrichtung
  - Broadcast umbenennen
  - Passcode ändern
7. Fehlerbehebung
8. Support & Feedback

## Schnellübersicht

- Tasten & Anzeigen

Weiter



# 1. Bevor Sie beginnen

Am besten geeignet für **Auracast Hörgeräte**

- [Kompatibilität prüfen](#) ↗

## Andere Hörgeräte

Hörgeräte mit Loop (T-Coil)

- Verwenden Sie Empfänger + Nackenloop (z.B. [AuraClip](#))

Legacy-Hörgeräte

- Verwenden Sie Empfänger (3,5 mm Kopfhörer)
- Oder verwenden Sie Auracast-Kopfhörer

## Bluetooth-Kopfhörer (Optional)

- Kein Dual-Link

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung](#) →



## 2. Ton vom Fernseher holen

- 1 Schalten Sie den Sender ein.
- 2 Verbinden Sie ihn mit **Fernseher über ein Audiokabel.**

- **OPT (Empfohlen)**  
Bestes Klangbild & stabilste Verbindung
- **AUX (3,5 mm)**  
Falls kein optischer Anschluss vorhanden
- **Nur HDMI-Fernseher?**  
Verwenden Sie [HAX06](#) HDMI→  
Optisch Adapter



*Nicht sicher? [Senden Sie uns](#) ein Foto Ihrer TV-Anschlüsse.*

Weiter

[Diese Anleitung bewerten →](#)

## 3. Stelle den TV-Ton auf PCM

Für **Optisch**-Verbindung Benutzer

1 Audio-Ausgang

 **Optisch**

2 Digitaler Audio-Ausgang

 **PCM (Erforderlich)**

Wenn auf **PCM** eingestellt, sind Sie startklar.

*Nicht sicher, wie **PCM einstellen?***



*Überprüfen Sie die [markenweise TV-Anleitung](#) ↗*

Weiter

[Bewerte diesen Leitfaden](#) →

# Wählen Sie Ihr Hörgerät

Wählen Sie eine Option unten

**A**



## Hörgeräte

→ Übertragung an mehrere  
**Auracast-fähige**  
Hörgeräte

**B**



## Bluetooth-Kopfhörer

→ Verbinden mit **einem Kopfhörer** nur

## 4. Verwendung mit Hörgeräten

Funktioniert mit **Auracast-kompatiblen** Hörgeräten. Siehe [Kompatibilitätsprüfer](#) ↗

**1** Schalten Sie den Lautstärkeschalter auf EIN. → Automatischer Wechsel in Auracast-Modus.

 LED  wird **dauerhaft weiß**.

- *Wenn die LED  nicht leuchtet, drücken Sie  einmal.*

**2** Finden und verbinden Sie die Übertragung in Ihrer Hörgeräte-App.

 *Benötigen Sie Hilfe?  
Siehe Markenleitfaden auf [nächster Seite](#).*

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung](#) →

< Zurück



Menü

Treten Sie Auracast mit Ihrer Hörgeräte-App bei



Sie öffnen eine neue Anleitung.  
Kehren Sie hierher zurück, wenn Sie fertig sind.

ReSound GN

danalogic GN

oticon

Jabra GN



WIDEX

  
Cochlear®

 **Beltone**™

**Bernafon**  
THE SOUND EXPERIENCE

**PHILIPS**

Weiter


[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)

## Mit Auracast-Assistenten beitreten

- Verfügbar auf neueren Android-Handys. [Unterstützte Telefone prüfen](#) ↗
- **Widex** unterstütztes Modell: **Allure (Firmware  $\geq$  5.1.20)**

### *Beispiel: Samsung Galaxy S24*

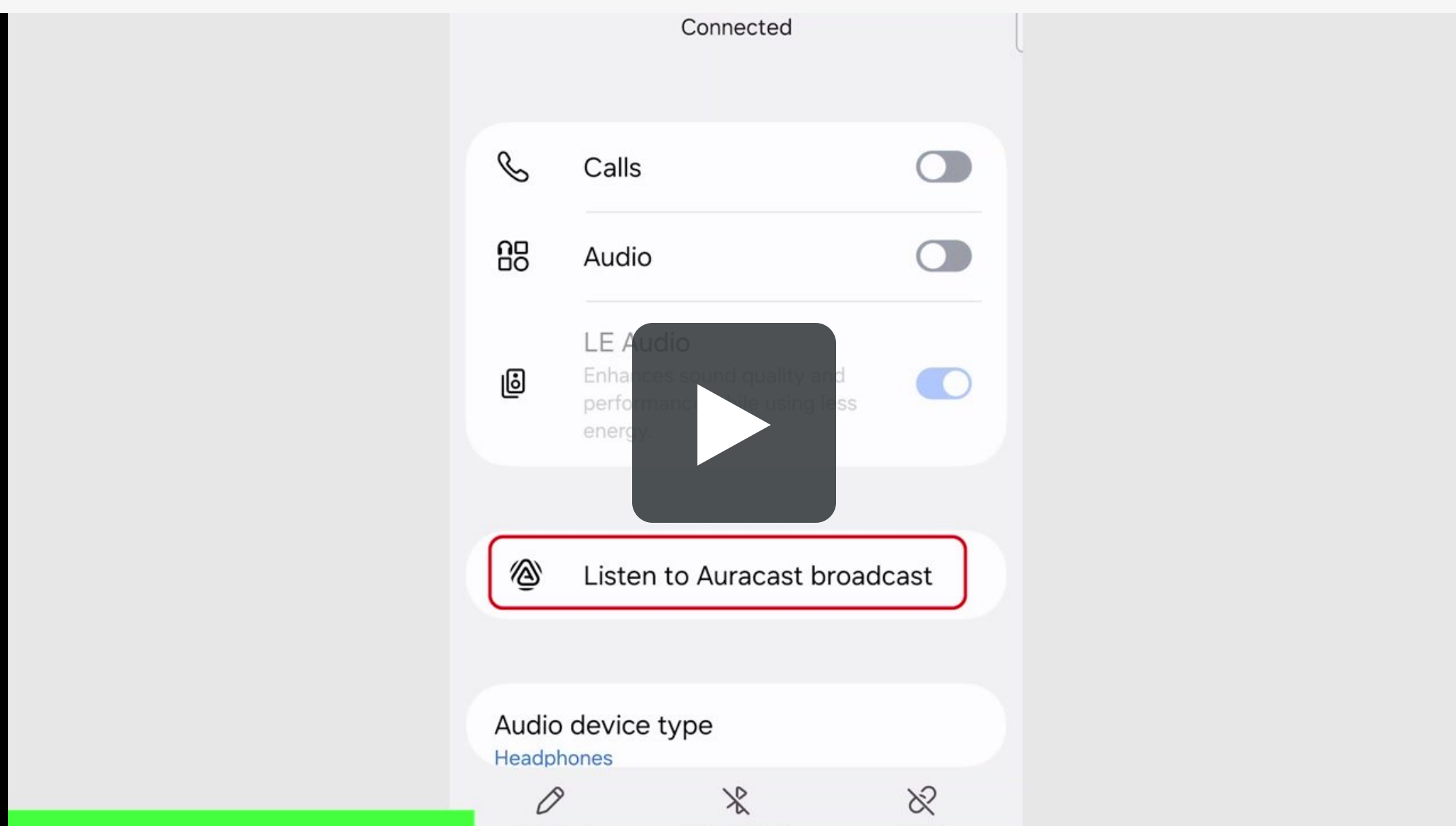


- 1 Verbinden Sie Hörgeräte mit dem Telefon.
- 2 Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen des Telefons.
- 3 Tippen Sie auf Hören Sie sich die Auracast-Übertragung an
- 4 Wählen Sie eine Übertragung aus.



Weiter

[Bewerten Sie diesen Leitfaden](#) →

## 5. Verwendung mit Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Schiebeschalter auf EIN stellen.
  - 2 Drücken Sie  um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. → LED blinkt **rot** & **blau**.  
*☞ Falls nicht, halte .*
  - 3 Sicherstellen, dass die Kopfhörer im Pairing-Modus sind.  
*☞ Nicht sicher?*  
[Anleitung zum Pairing der Kopfhörer ↗](#)
- ✅ Verbunden: LED  leuchtet **durchgehend**.



Weiter


# 6. Erweiterte Einrichtung

## 6.1 Broadcast umbenennen

Ändern Sie Ihren Auracast-Übertragungsnamen für eine einfachere Identifikation.

### Schritte:

- 1 Öffnen Sie die [Firmware-Update-Seite](#)
- 2 Laden Sie den Avantree Firmware Updater herunter und installieren Sie ihn
- 3 Gehen Sie zu Einstellungen → Übertragungsname und geben Sie einen neuen Namen ein

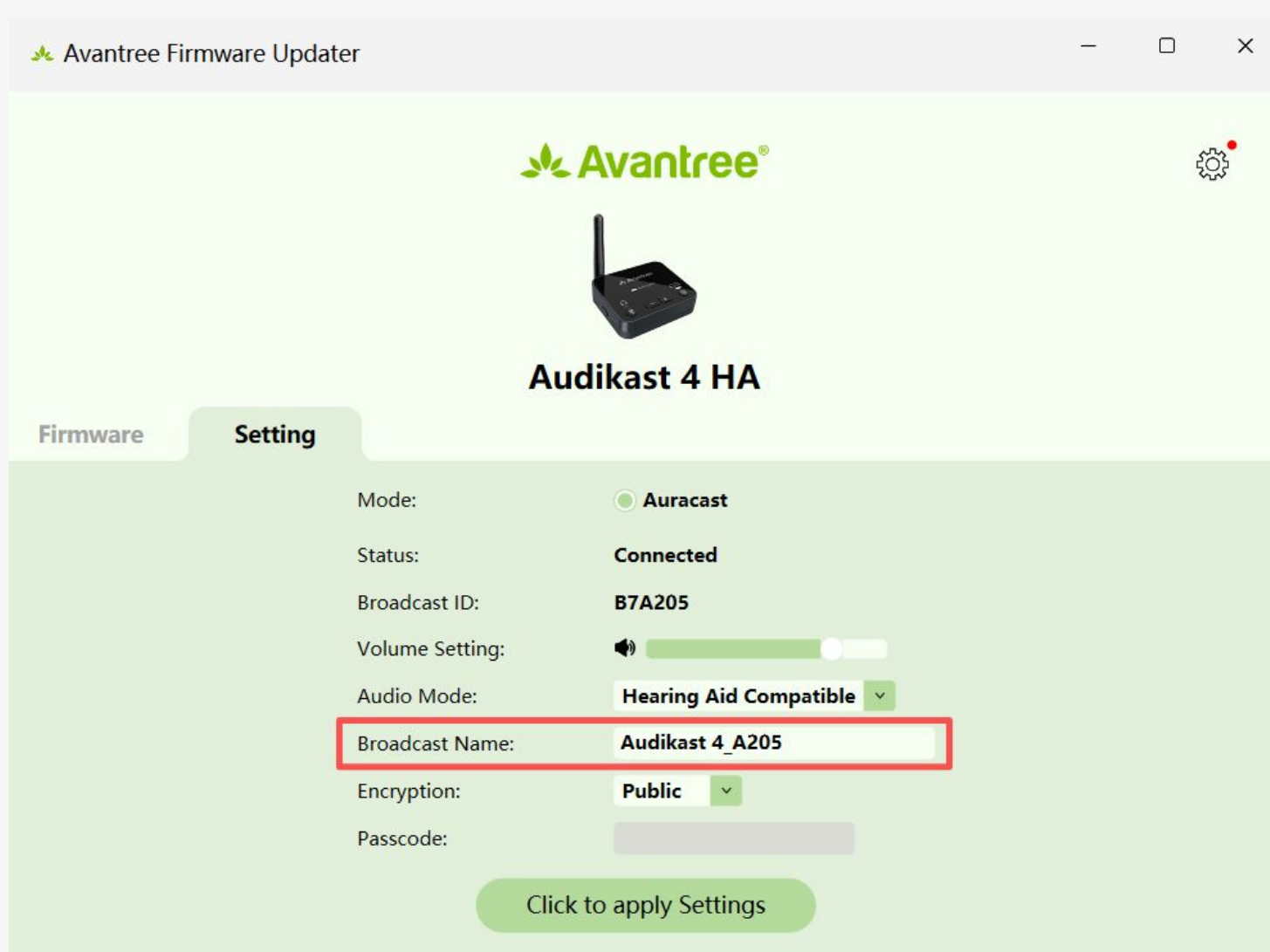

Weiter


[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)

## 6.2 Passcode ändern

Legen Sie einen Broadcast-Passcode fest oder aktualisieren Sie ihn, um den Zugriff zu steuern und die Privatsphäre zu verbessern.

### Schritte:

Gehen Sie zu Einstellungen → Verschlüsselung und geben Sie ein Passwort ein

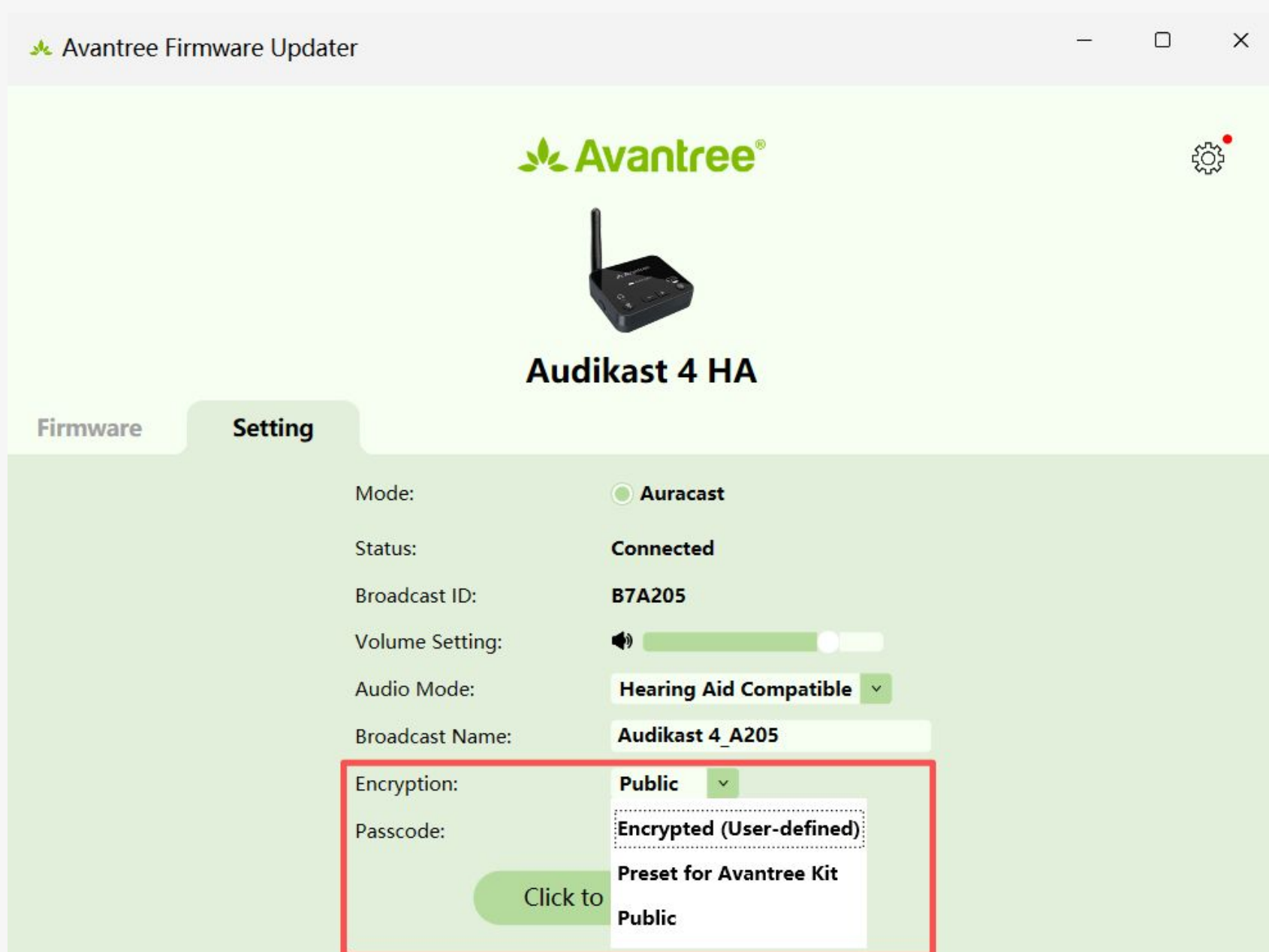

Weiter



# 7. Fehlerbehebung

## Häufige Probleme

---

- [Kann keine Verbindung zu Hörgeräten herstellen ↗](#)
- [PCM einstellen, um kein Ton zu verhindern ↗](#)
- [Kompatibilitäts-Check schnell ↗](#)

[👉 Weitere FAQ & Hilfe ↗](#)



*Noch Hilfe benötigt?*  
[Support kontaktieren ↗](#)

Weiter

[Bewerte diese Anleitung →](#)



## 8. Support & Feedback

### Agenten-Support

Brauchen Sie Hilfe? Wir sind hier.



E-Mail



Anrufen



Chat

### Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

**24-Monatige Garantie erhalten**

# Tasten & Anzeigen



## **A** Audiosignal

- ✓ Fest → OK
- ⚠ Blinkend → Audioproblem

## **B** Bluetooth

- ✓ Fest → Verbunden
- ⚠ Blitzend → Nicht verbunden

## **C** Auracast

- ✓ **Weiß fest** → Übertragung für Hörgeräte
- ✓ Fest orange → Übertragung für Auracast-Kopfhörer/Lautsprecher

👉 [Vollständiger Leitfaden für Tasten & Anzeigen](#)

[Bewerte diesen Leitfaden →](#)