



# Audikast 4HA

Trasmittitore TV Auracast  
per apparecchi acustici




## Guida utente interattiva

Versione 2.3



Configurazione iniziale

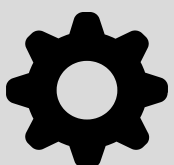

Risoluzione dei problemi

< Indietro



# Menu Principale

1. Prima di Iniziare
2. Ottieni Suono dalla TV
3. Imposta l'Audio della TV su PCM
4. Usa con Apparecchi Acustici
5. Usa con Cuffie Bluetooth
6. Configurazione Avanzata
  - Rinomina Trasmissione
  - Cambia Passcode
7. Risoluzione dei Problemi
8. Supporto & Feedback

## Riferimento Rapido

- Pulsanti & Indicatori

Avanti

# 1. Prima di iniziare

Ottimizzato per **Apparecchi acustici Auracast**

- [Verifica compatibilità](#) ↗

## Altri apparecchi acustici

Apparecchi acustici con loop (T-coil)

- Usa ricevitore + loop per il collo (ad esempio [AuraClip](#))

Apparecchi acustici legacy

- Usa ricevitore (cuffie da 3,5 mm)
- Oppure usa cuffie Auracast

## Cuffie Bluetooth (Opzionale)

- Nessun doppio collegamento

Avanti

[Valuta questa guida](#) →

## 2. Ottieni Suono dalla TV

❶ Accendi il trasmettitore.

❷ Connetti alla **TV tramite un cavo audio.**

- **OPT (Consigliato)**

Miglior suono & più stabile

- **AUX (3.5mm)**

Se nessuna porta ottica

- **TV solo HDMI?**

Usa [HAX06](#) adattatore

HDMI→Ottico



*Non sei sicuro? [Inviaci](#) una foto delle porte della tua TV.*

Avanti

[Valuta questa guida →](#)

## 3. Imposta l'audio della TV su PCM

Per utenti con connessione **Ottica**

**1** Uscita audio

 **Ottico**

**2** Uscita audio digitale

 **PCM (Obbligatorio)**

Se impostato su **PCM**, sei a posto.



*Non sei sicuro di come **impostare PCM**?  
Controlla la [guida TV per marca](#) ↗*

Avanti

[Valuta questa guida](#) →



# Scegli il tuo dispositivo di ascolto

Seleziona un'opzione di seguito

**A**



## Apparecchi acustici

→ *Trasmetti a più  
**compatibili Auracast**  
apparecchi acustici*

**B**



## Cuffie Bluetooth

→ *Connetti a **uno cuffia** solo*



[Valuta questa guida →](#)

## 4. Uso con apparecchi acustici


Compatibile con apparecchi acustici **abilitati Auracast**. Vedi [Verificatore di compatibilità](#) ↗

**1** Sposta l'interruttore di alimentazione su ON. → Entra automaticamente modalità Auracast.

 LED  si accende **di bianco solido**.

- *Se l'LED  non si accende, premi  una volta.*

**2** Trova e unisci la trasmissione nell'app del tuo apparecchio acustico.

 *Hai bisogno di aiuto?  
Vedi la guida del marchio sulla [pagina successiva](#).*

Avanti

[Valuta questa guida](#) →

< Indietro



Menu

Unisci Auracast con la tua app per apparecchi acustici



Aprirai una nuova guida.  
Torna qui una volta terminato.

ReSound GN

danalogic GN

oticon

Jabra GN



WIDEX



Beltone™

Bernafon  
THE SOUND EXPERIENCE

PHILIPS

Avanti


[Valuta questa guida →](#)

## Unisciti con Auracast Assistant

- Disponibile su telefoni Android più recenti.  
[Verifica telefoni supportati](#) ↗
- **Modello supportato Widex:**  
**Allure (firmware  $\geq$  5.1.20)**

### *Esempio: Samsung Galaxy S24*

- 1 Connetti gli apparecchi acustici con il telefono.
- 2 Apri le impostazioni Bluetooth del telefono.
- 3 Tocca **Ascolta trasmissione Auracast**
- 4 Seleziona una trasmissione.

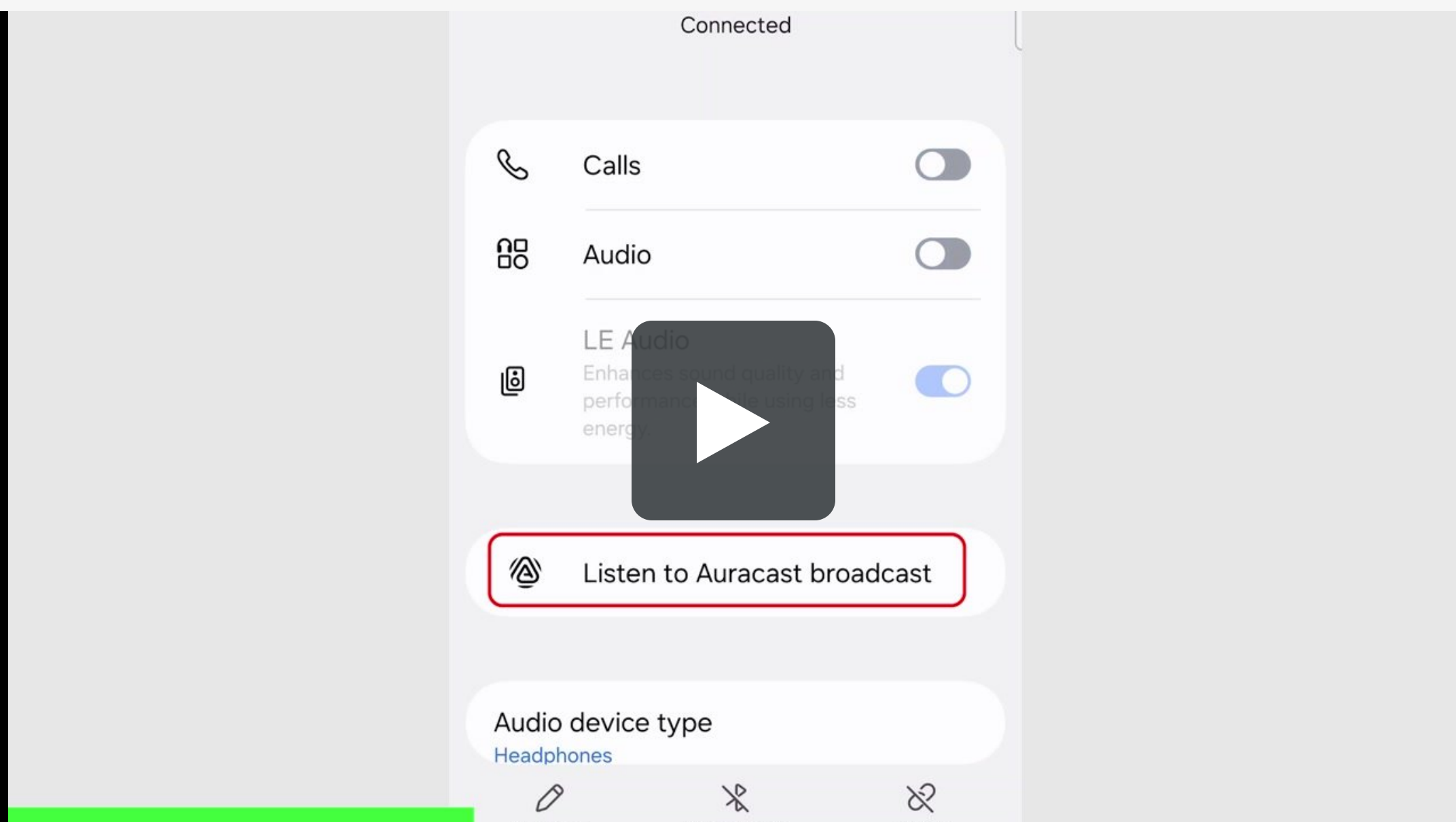

Avanti

[Valuta questa guida](#) →

## 5. Uso con cuffie Bluetooth

❶ Sposta l'interruttore di alimentazione su ON.

❷ Premi  per passare alla modalità Bluetooth. → LED lampeggia **rosso** & **blu**.  
*↳ Se non, tieni .*

❸ Assicurati che le cuffie siano in modalità di accoppiamento.

*↳ Non sei sicuro?*

[Guida all'accoppiamento delle cuffie](#) ↗

✅ Connesso: LED  si accende **solido**.



Avanti

[Valuta questa guida](#) →


# 6. Configurazione Avanzata

## 6.1 Rinomina Trasmissione

Modifica il nome della trasmissione Auracast per una più facile identificazione.

### Passaggi:

- 1 Apri la [pagina di aggiornamento del firmware](#)
- 2 Scarica e installa Avantree Firmware Updater
- 3 Vai su Impostazioni → Nome Trasmissione e inserisci un nuovo nome

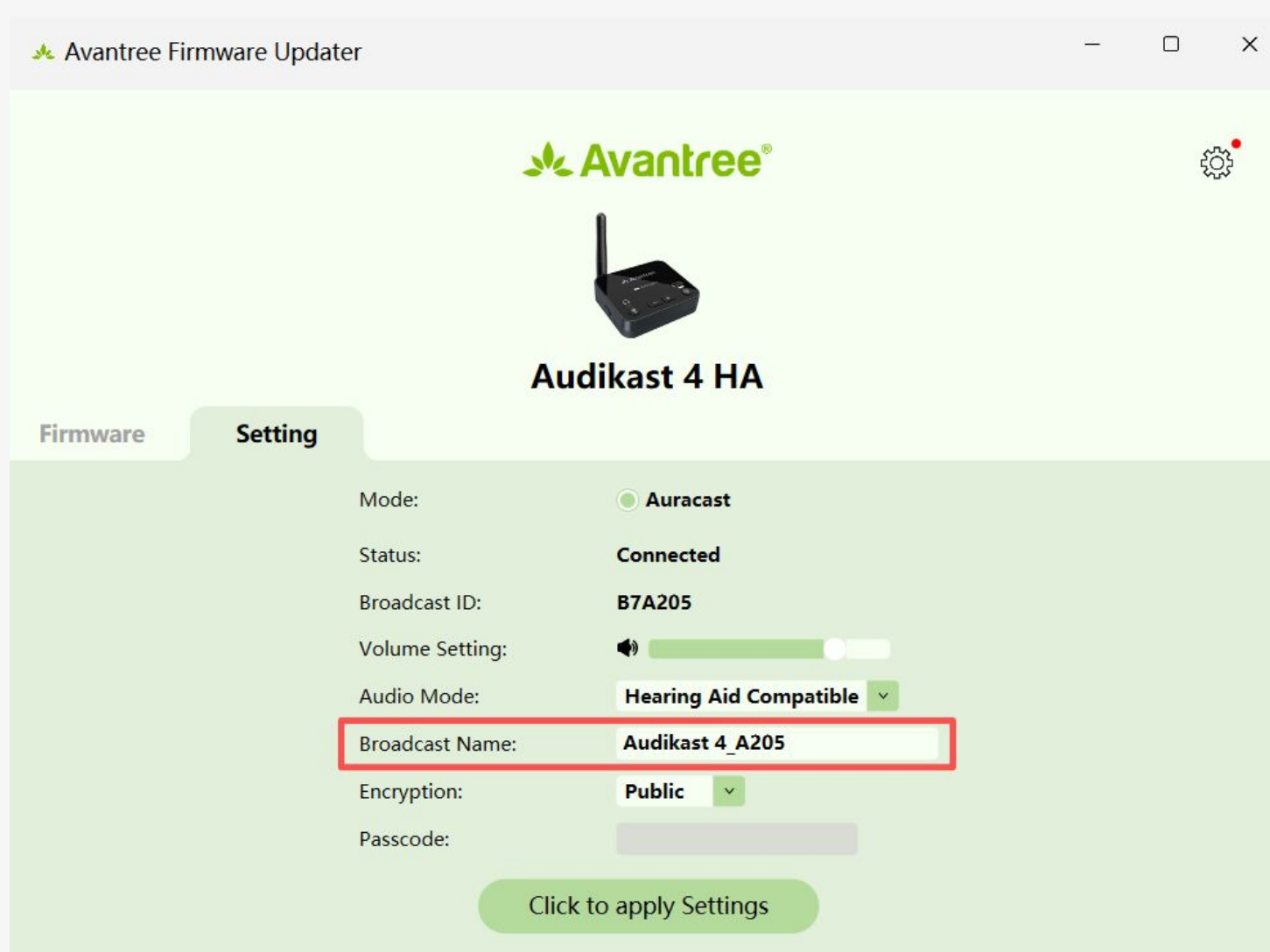

Avanti


[Valuta questa guida →](#)

## Cambia codice di accesso

Imposta o aggiorna il codice di accesso alla trasmissione per controllare l'accesso e migliorare la privacy.


### Passaggi:

Vai su Impostazioni → Crittografia e inserisci una password

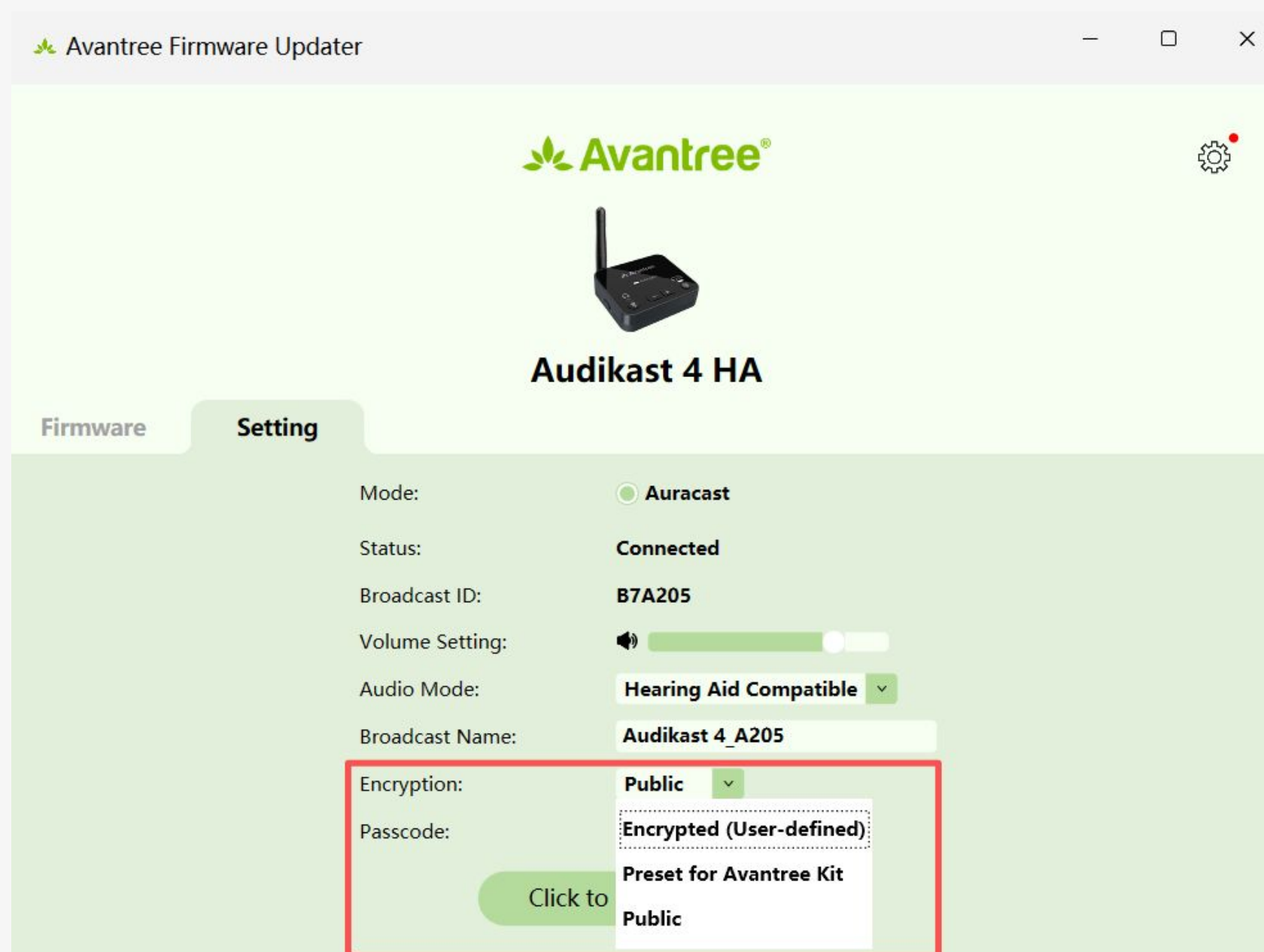

Avanti

[Valuta questa guida →](#)

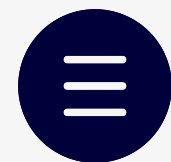

# 7. Risoluzione dei problemi

## Problemi comuni

---

- [Impossibile connettersi agli apparecchi acustici ↗](#)
- [Imposta PCM per prevenire nessun suono ↗](#)
- [Verifica rapida compatibilità ↗](#)

[👉 Domande frequenti & Aiuto ↗](#)



*Hai ancora bisogno di aiuto?*

[Contatta il supporto ↗](#)

Avanti

[Valuta questa guida →](#)



## 8. Supporto & Feedback

### Supporto agente

Hai bisogno di aiuto? Siamo qui.



Email



Chiamata




Chat

### Registra il tuo prodotto

Estendi la garanzia & ricevi aggiornamenti.

**Ottieni garanzia di 24 mesi**

# Pulsanti e Indicatori

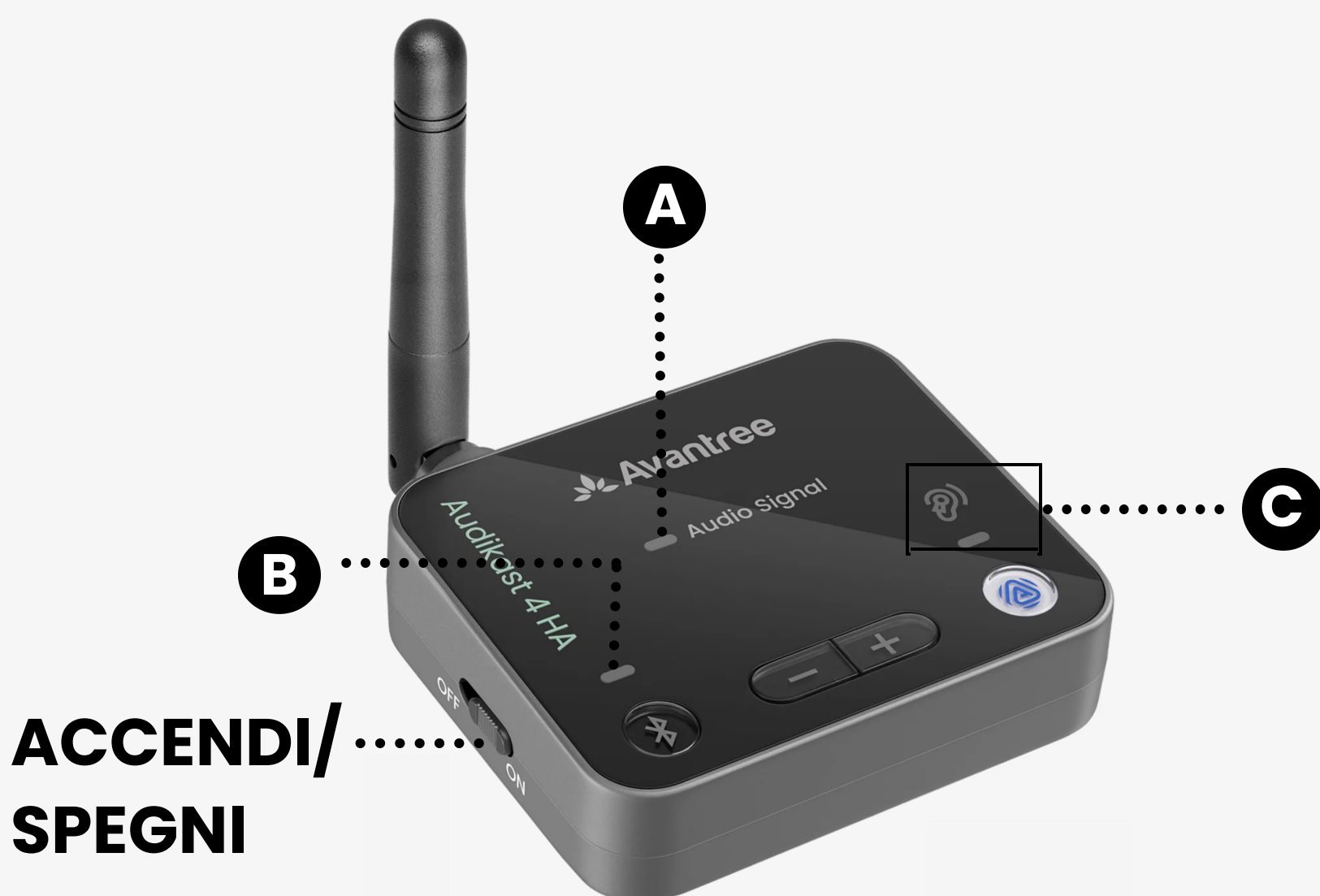

ACCENDI/  
SPEGNI

## **A** Segnale Audio

✓ Solido → OK

⚠ Lampeggiante → Problema audio

## **B** Bluetooth

✓ Solido → Connesso

⚠ Lampeggiante → Non connesso

## **C** Auracast

✓ **Bianco solido** → Trasmissione per apparecchi acustici

✓ **Arancione solido** → Trasmissione per cuffie/speaker Auracast

[👉 Guida Completa a Pulsanti e Indicatori](#)

[Valuta questa guida →](#)