


AuraPlex MX / M3

Asistente Auracast
Sistema de Escucha



Usuario Interactivo Guía

Versión 2.4

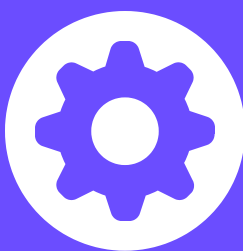

Iniciar Configuración



Activar Gratis
Garantía de 24 Meses

< Atrás



Menú Principal

1. Conectar a la Fuente de Audio
2. Escuchar con Receptor
3. Escuchar con tu Propio Dispositivo
 - Audífonos Auracast
 - Auracast Auriculares
 - Auriculares Bluetooth (Próximamente)
4. Configuración Avanzada
 - Nombre de Transmisión y Contraseña
 - Cambiar Transmisión (Receptor)
5. Encendido y Carga
6. Botones y Indicadores
7. Preguntas Frecuentes
8. Consejos de Implementación
9. Añadir Lugar al Mapa
10. Soporte

Siguiente

1. Conectar a la fuente de audio


- 1 Coloca el transmisor cerca de tu fuente de audio. Manténlo alejado de paredes u objetos metálicos
- 2 Conéctalo a una fuente de alimentación USB-C.
- 3 Elige **un** método de conexión:



AUX (3.5mm)
Mezclador




Bluetooth
Teléfono

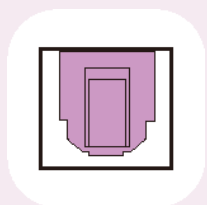


Óptico
TV



[Contáctanos](#) si necesitas un adaptador de corriente adicional.

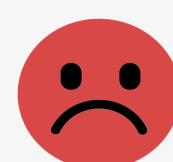


A. Conectar usando AUX

1 Enciende el transmisor. → LED "AUX" parpadea rojo. (Si no, presiona )



2 Conecta el cable AUX.
Ejemplo: mezclador

Utiliza un adaptador dual de 6.35mm TS a 3.5mm TRS. [Contáctanos](#) para uno gratis.

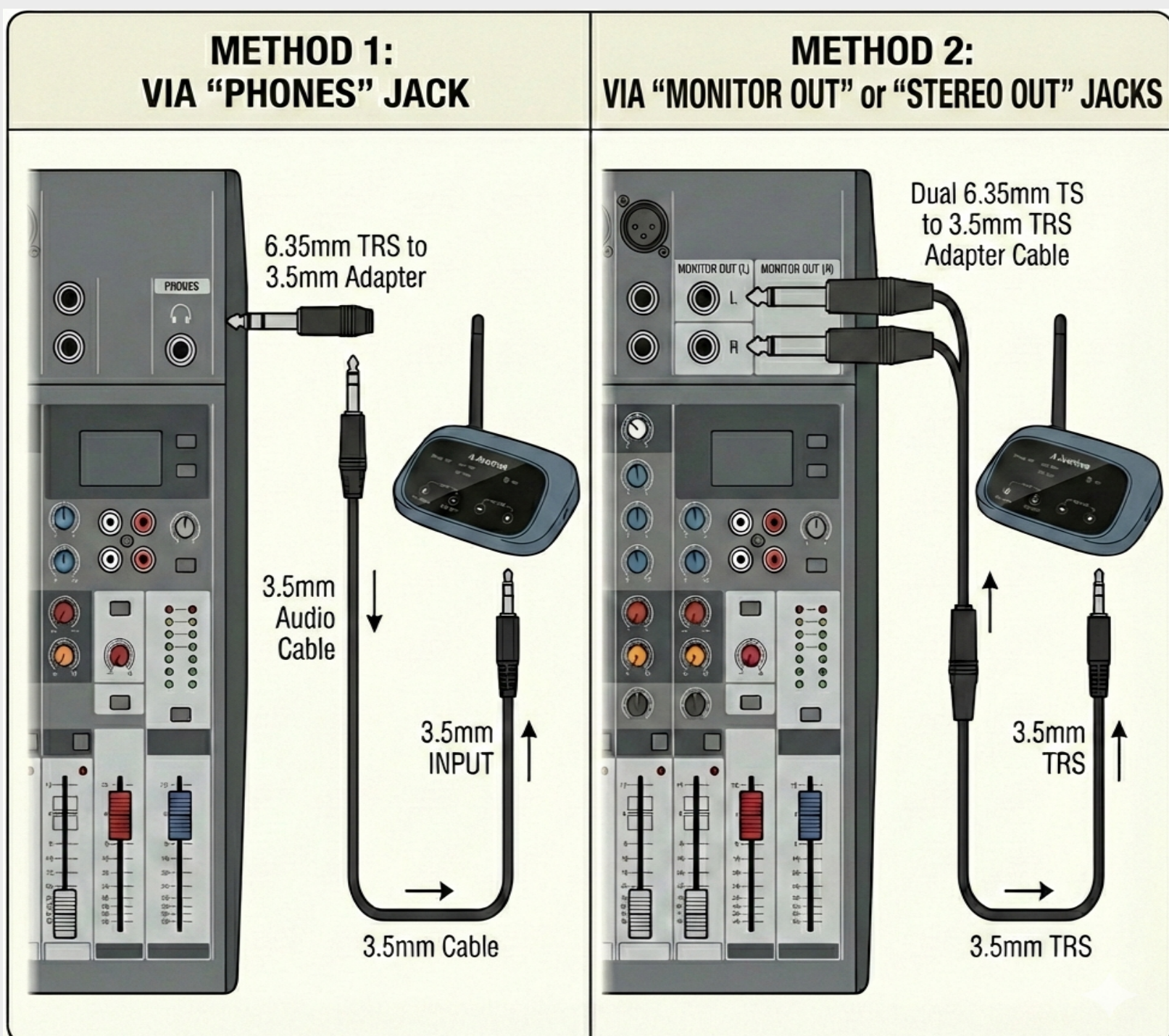



 Ajusta la configuración del mezclador/ volumen si el audio no suena correcto.

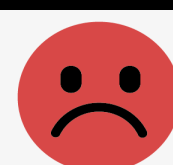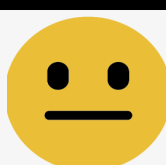Siguiente



B. Conectar mediante Bluetooth

Mantén tu teléfono cerca del transmisor.



- 1 Encienda el transmisor y presione  → LED "**Teléfono**" parpadea **rojo** & **azul**.
(Si no, mantenga presionado  durante 3s.)
- 2 Empareje con su dispositivo.
- 3 Reproduzca audio.



Mejor experiencia



- Utilice entrada de audio por cable para mayor estabilidad
- Alcance Bluetooth: **10-15 m (30-50 pies)**

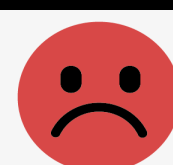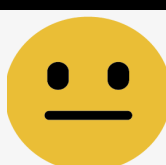Siguiente








C.1 Conectar usando óptico

- 1 Enciende el transmisor y pres 
→ LED “**OPT**” parpadea **rojo**.
(Si no, vuelve a presionar  de nuevo.)
- 2 Conecta el cable óptico.

Siguiente

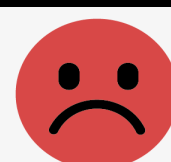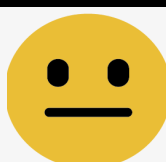

C.2 Configurar TV Audio a PCM

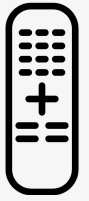

Usa tu **control remoto de la TV**



En tu TV:

1  Presiona Configuración

2  Ve a Sonido / Audio

3 Selecciona:



 Salida de audio: **Óptica**

 Formato digital: **PCM (Debe Usarse)**



- ¿No configurado en PCM?
→ SIN SONIDO
- ¿Necesitas ayuda para configurar PCM?
→ [Elige tu marca de TV](#)

Siguiente

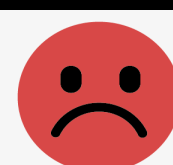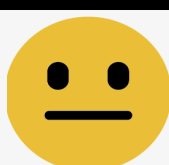

< Atrás



Menú

Selecciona tu televisor para ver los pasos exactos

Samsung



LG



Sony



TCL



Hisense



VIZIO



Panasonic



Philips



Roku





Sharp



¿No ves la marca de tu televisor?

Busca o pregunta a la IA: marca de TV + modelo configurado PCM

Siguiente

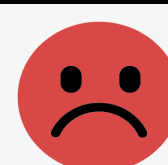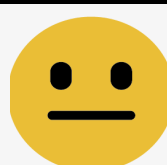

2. Escuchar con receptor



1 Conecta auriculares / bucle auditivo de 3,5 mm.



2 Encender receptores.

✓ **Conectado:** LED **línea naranja sólida.**

Siguiente

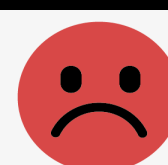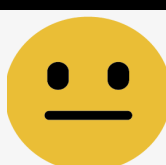

3. Escuchar con tu propio dispositivo





Auracast
Ayudas auditivas →



Auracast
Auriculares →



Auriculares
Bluetooth →
próximamente...

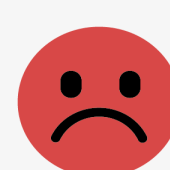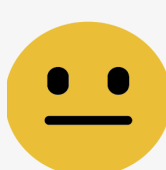

a. Auracast Audífonos

Selecciona tu marca para ver cómo unirse a Auracast.

ReSound GN

danalogic GN

oticon

Jabra GN



NUEAR

WIDEX





Beltone™

Bernafon
THE SOUND EXPERIENCE

PHILIPS



- *Abrirás una nueva guía. Vuelve aquí cuando termines.*
- *¿No ves tu marca?*
[Prueba otra opción de escucha.](#) ↗

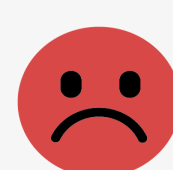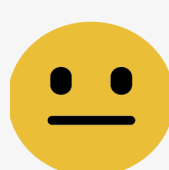

b. Auracast Auriculares

Escucha directamente con **Auracast auriculares / auriculares.**

Compatible con las principales marcas, incluyendo:

- Sony
- JBL
- Venucast / Avantree
(ejemplos abajo)



[Aria Aura](#)



[Serie Infinity](#)





[Pebble Aura](#)

Cómo unirse:

- ✓ • **Dispositivos Avantree**
Solo enciende y escucha.
- ✓ • **Otras marcas** (JBL, Samsung, etc.)
usan su aplicación complementaria.

Siguiente

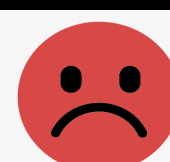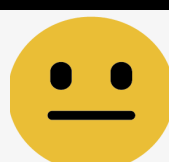

c. Auriculares Bluetooth

Próximamente...

Buenas noticias: Los auriculares Bluetooth pronto podrán unirse a Auracast.



Conecta un **activador Auracast USB-C** en el teléfono, luego abre la aplicación Venucast para unirte a la transmisión.

Una forma sencilla de usar los auriculares Bluetooth existentes.

→ [Aprende más](#)



Siguiente

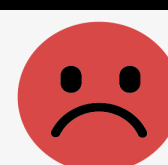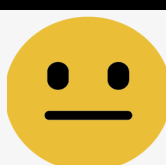

4. Configuración avanzada

4.1 Nombre de transmisión y contraseña

Personaliza tu nombre de transmisión y contraseña para:



Gestionar acceso

Agrega una contraseña para controlar quién puede unirse a tu transmisión y evitar accesos no deseados.





Organizar grupos

Usa nombres únicos para diferentes salas, idiomas o zonas para que los oyentes puedan encontrar fácilmente el canal correcto.

[Siguiente](#): Configurar en la herramienta DFU

Siguiente

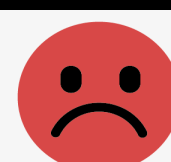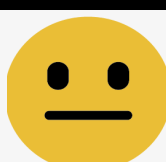

Configurar en la herramienta DFU:

❶ Conecta el transmisor a tu PC y enciéndelo.

❷ → [Descarga e instala Avantree Updater](#) (Windows / Mac).



❸ Abre el actualizador y confirma:
Versión del firmware \geq 20.4.2

Nota: [Restablece el transmisor](#) después de la actualización.

❹ Abre la pestaña "Avanzado" para configurar el nombre y la contraseña.



Siguiente

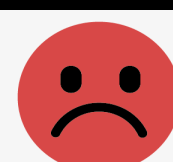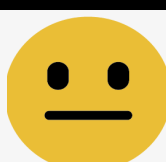

4.2 Cambiar Transmisión (Receptor)

El receptor se une automáticamente a la transmisión más fuerte al encenderse.

Almacena **hasta 3** transmisiones por sesión

Cómo cambiar

Mantén presionado el **MFB** durante 3s

Estado del LED



Parpadeo naranja → cambio

Naranja sólido → conectado



Si el grupo está habilitado, el receptor está bloqueado a un transmisor específico y no puede cambiar de transmisión.

Siguiente

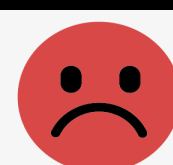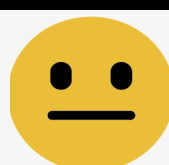

5. Energía y carga

Utiliza el **cargador incluido** y cable USB-C.

Transmisor



- Debe estar conectado para funcionar. (5V, 1-2.4A)

Receptores





- Utiliza la base de carga
- Batería baja: LED parpadea **rojo**
- Cargando: LED parpadea **blanco**
- Completamente cargado: LED apagado (~1,5 hrs)
- Tiempo de reproducción: Hasta 16 hrs



[Contáctanos](#) si necesitas un adaptador de corriente adicional.

Siguiente

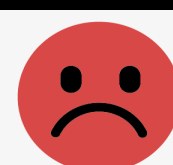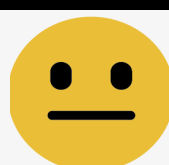

6. Botones y Indicadores



Transmisor





- **LED de entrada del transmisor**

- A** **AUX / OPT**
 - Sólido → Señal válida
 - Parpadeo → Sin señal

- B** **Teléfono**
 - Sólido → Conectado a fuente de audio Bluetooth
 - Parpadeo rojo & azul → Modo de emparejamiento

- **Interruptor de entrada:**
 -  • Audio Bluetooth
 -  • Entrada OPT/AUX

Siguiente

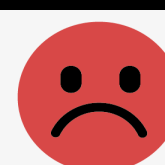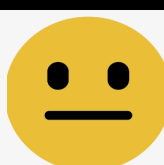



7. Preguntas frecuentes

Problemas comunes



- Retraso en el audio
- Claridad en los audífonos



¿Aún necesitas ayuda?

[Contactar con soporte](#) ↗

Siguiente

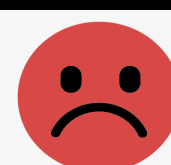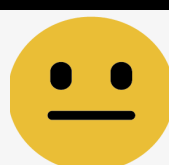

8. Consejos para el despliegue



8. Señalización

Utiliza la señalización para ayudar a los usuarios a encontrar y unirse rápidamente a tu transmisión Auracast.

Coloca señales en las entradas, áreas de asientos o cerca de pantallas.

→ [Descarga la señalización](#)

Siguiente

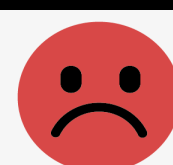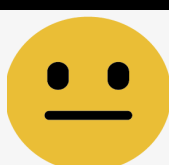

8.2 Cobertura y Alcance



- **Alcance**

Mantén el transmisor y el receptor dentro de 100 m / 328 pies (línea de visión)

- **Fuente Bluetooth**

Mantén tu teléfono cerca del transmisor (<30 pies /10 m)

Siguiente

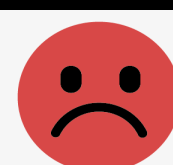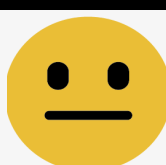




9. Añadir lugar al mapa

Ayuda a las personas cercanas a descubrir y unirse a tu transmisión Auracast.

Aumenta la visibilidad para:



Iglesias

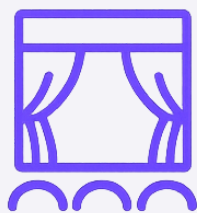

Teatros





Lugares públicos

Los lugares listados pueden ser descubiertos a través del mapa Auracast.

→ [Añade tu lugar](#)



Siguiente

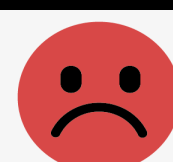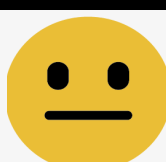

< Atrás



Menú

Califica esta guía

Tus comentarios nos ayudan a mejorar esta guía para todos.

Solo toma un momento.



Siguiente



10. Registrar y Soporte

Registrar Tu Producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

[Obtener Garantía de 24M](#)

¿Necesitas ayuda? Contáctanos



Correo Electrónico

support@venucast.com



Llamar



EE.UU. (Llamada gratuita)

[+1 888 464 0168](#)



Otras Regiones



Chat

