

AuraPlex MX / M3

Assistive Auracast
Système d'écoute



Utilisateur interactif Guide

Version 2.4



Démarrer la configuration



Activer gratuitement
Garantie de 24 mois

< Retour



Menu Principal

1. Se connecter à la source audio
2. Écouter avec le récepteur
3. Écouter avec son propre appareil
 - Aides auditives Auracast
 - Casque Auracast
 - Casque Bluetooth (Bientôt disponible)
4. Paramètres avancés
 - Nom de diffusion & Mot de passe
 - Basculer la diffusion (Récepteur)
5. Alimentation & Charge
6. Boutons & Indicateurs
7. FAQ
8. Conseils de déploiement
9. Ajouter un lieu sur la carte
10. Support

Suivant

1. Se connecter à la source audio


- 1 Placez le transmetteur près de votre source audio. Éloignez-le des murs ou des objets métalliques
- 2 Branchez-le à une source d'alimentation USB-C.
- 3 Choisissez **une** connexion:



AUX (3,5 mm)
Mixeur





Bluetooth
Téléphone

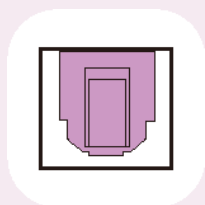

Optique
TV



[Contactez-nous](#) si vous avez besoin d'un adaptateur secteur supplémentaire.

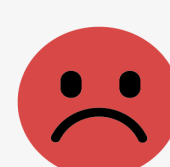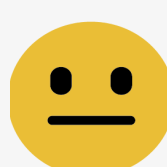


A. Connexion via AUX

1 Allumer le transmetteur. → LED "AUX" clignote **rouge**. (Sinon, appuyez)



2 Branchez le câble AUX.
Exemple : mélangeur

Utilisez un adaptateur dual 6,35 mm TS vers 3,5 mm TRS. [Contactez-nous](#) pour un modèle gratuit.

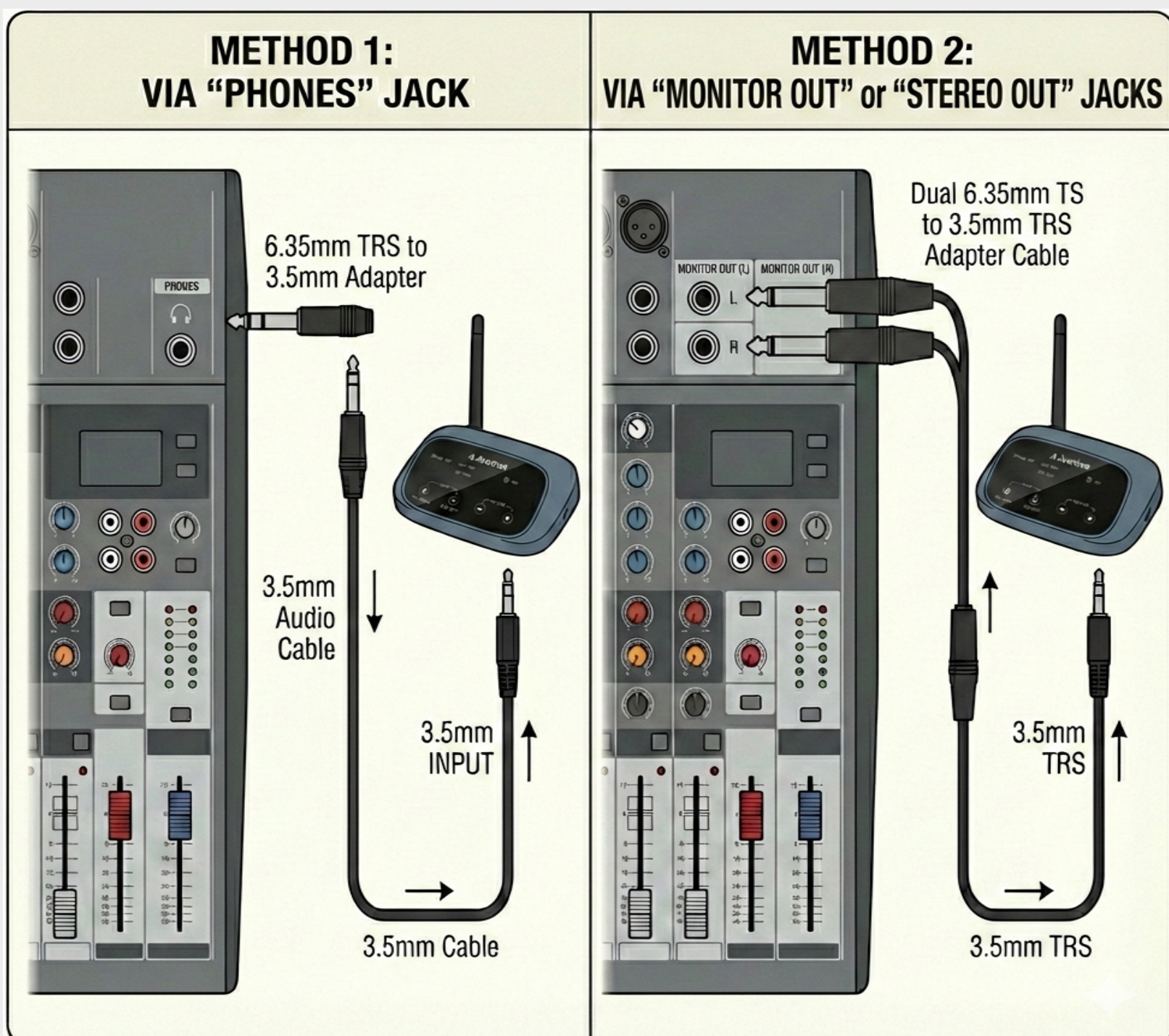

i Ajustez les réglages du mélangeur/le volume si le son ne semble pas correct.

Suivant

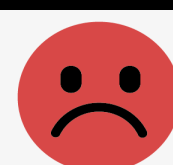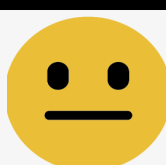

B. Se connecter via Bluetooth

Gardez votre téléphone près du transmetteur.

❶ Allumer le transmetteur et primer  → LED "**Téléphone**" clignote **rouge** & **bleu**.
(Sinon, maintenez  pendant 3s.)

❷ Associez avec votre appareil.



❸ Jouer l'audio.



Meilleure expérience



- Utiliser une entrée audio filaire pour une meilleure stabilité
- Portée Bluetooth : **10-15 m (30-50 ft)**

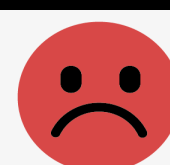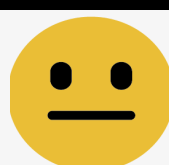Suivant







C.1 Connexion via Optique

- 1 Allumer l'émetteur et presser 
→ LED "**OPT**" clignote **rouge**.
(*Sinon, appuyez encore sur .*)
- 2 Branchez le câble optique.

Suivant

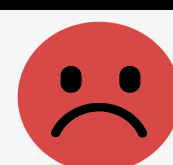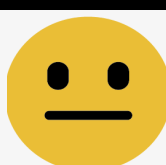

C.2 Régler le son de la TV sur PCM



Utilisez la **télécommande de la TV**



Sur votre TV :

1  Appuyez sur Paramètres

2  Allez dans Son / Audio

3 Sélectionnez :



 Sortie audio : **Optique**

 Format numérique :
PCM (doit être utilisé)



- Pas réglé sur PCM ? → SANS SON
- Besoin d'aide pour régler PCM ?
→ [Choisissez la marque de votre TV](#)

Suivant

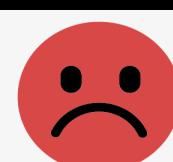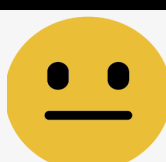



Sélectionnez votre téléviseur pour voir les étapes exactes

Samsung >

LG >

Sony >

TCL >

Hisense >

VIZIO >

Panasonic >

Philips >

Roku >



Sharp >



Vous ne voyez pas votre marque de téléviseur ?


Recherchez ou demandez à l'IA : marque de téléviseur + modèle réglé PCM

Suivant

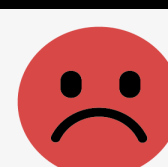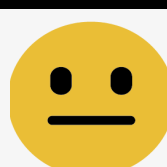

2. Écouter avec le récepteur



❶ Brancher des écouteurs / boucle d'oreille 3,5 mm

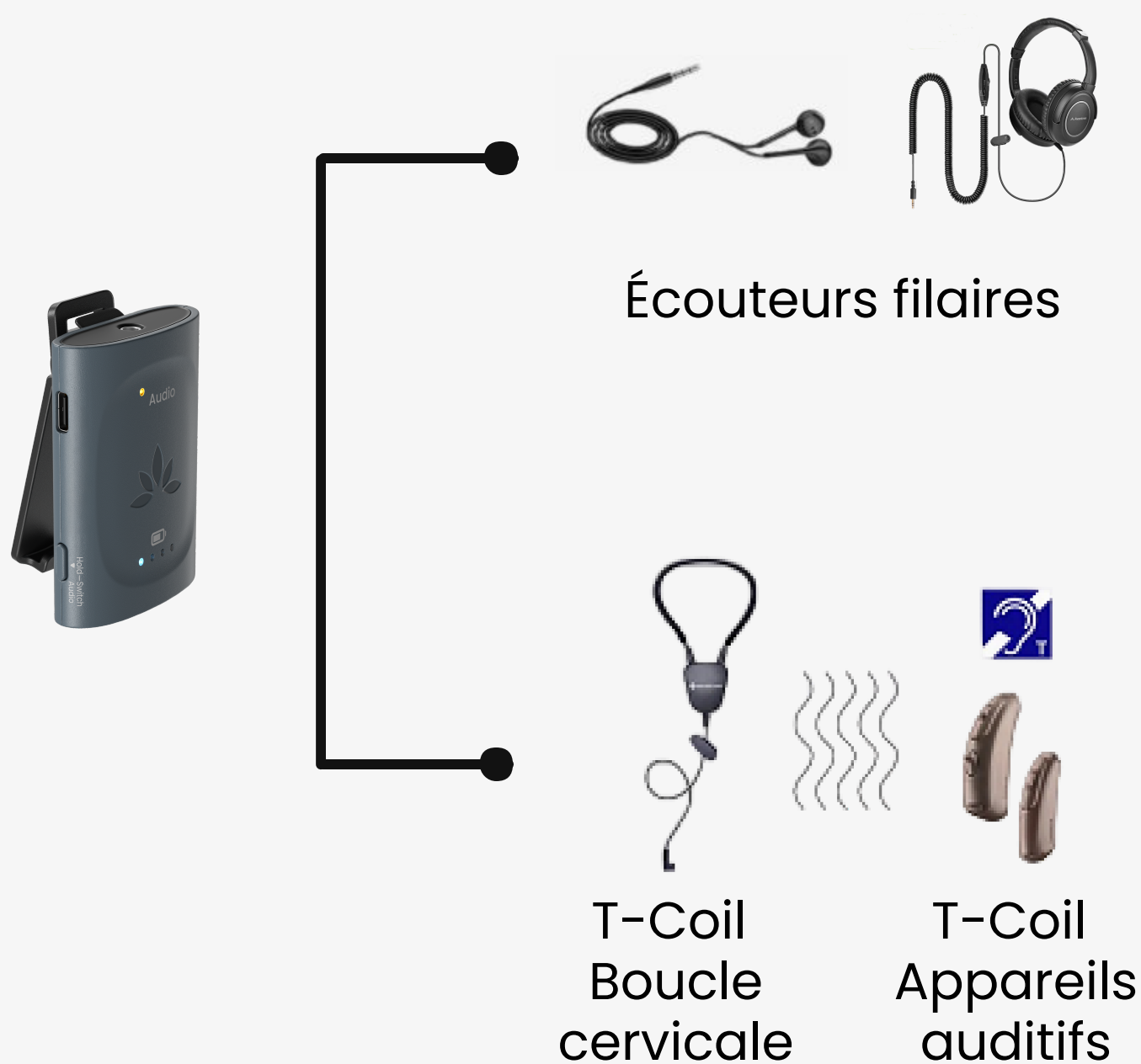

❷ Allumer les récepteurs.

✓ **Connecté** : LED orange solide.

Suivant

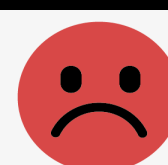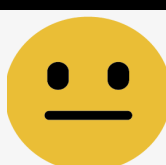

3. Écouter avec son propre appareil



**Auracast
Aides Auditives**





**Auracast
Casque**



**Casque
Bluetooth**



bientôt disponible...

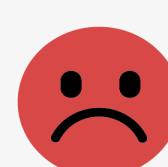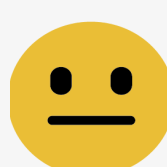



a. Aides auditives Auracast

Sélectionnez votre marque pour voir comment rejoindre Auracast.

ReSound GN

danalogic GN

oticon

Jabra GN



NUEAR

WIDEX





Beltone™

Bernafon
THE SOUND EXPERIENCE

PHILIPS



- *Vous ouvrirez un nouveau guide. Revenez ici une fois terminé.*
- *Vous ne voyez pas votre marque ? [Essayez une autre option d'écoute.](#) ↗*

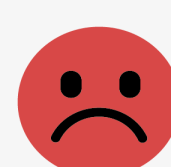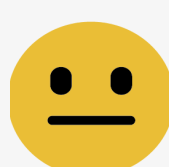

b. Casque Auracast

Écoutez directement avec **casques / écouteurs Auracast**.

Supporté par les grandes marques, notamment :

- Sony
- JBL
- Venucast / Avantree
(exemples ci-dessous)



[Aria Aura](#)



[Série Infinity](#)





[Pebble Aura](#)

Comment rejoindre :

- ✓ • **Appareils Avantree**
Il suffit d'allumer et d'écouter.
- ✓ • **Autres marques** (JBL, Samsung, etc.)
utilisent leur application compagnon.

Suivant

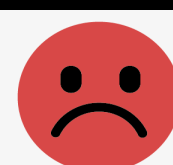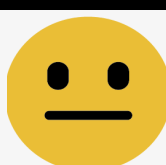

c. Casque Bluetooth

Bientôt disponible...

Bonne nouvelle : Les casques Bluetooth pourront bientôt rejoindre Auracast.



Branchez un **enableur USB-C Auracast** dans le téléphone, puis ouvrez l'application Venucast pour rejoindre la diffusion.

Une façon simple d'utiliser les casques Bluetooth existants.

→ [En savoir plus](#)



Suivant

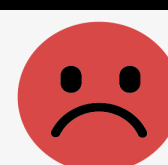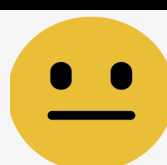

4. Paramètres avancés

4.1 Nom de diffusion et mot de passe

Personnalisez votre nom de diffusion et votre mot de passe :



Gérer l'accès

Ajoutez un mot de passe pour contrôler qui peut rejoindre votre diffusion et empêcher l'accès non autorisé.





Organiser les groupes

Utilisez des noms uniques pour différentes salles, langues ou zones afin que les auditeurs puissent facilement trouver le bon canal.

[Prochaine étape](#) : Configuration dans l'outil DFU

Suivant

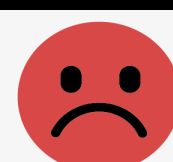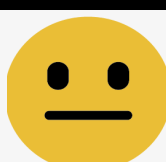


Configurer dans l'outil DFU :

❶ Connectez le transmetteur à votre PC et allumez-le.



❷ → [Télécharger et installer Avantree Updater](#) (Windows / Mac).

❸ Ouvrez l'outil de mise à jour et confirmez: Version du firmware \geq 20.4.2
Remarque : [Réinitialiser le transmetteur](#) après la mise à jour.

❹ Ouvrez l'onglet "Avancé" pour définir le nom et le mot de passe.

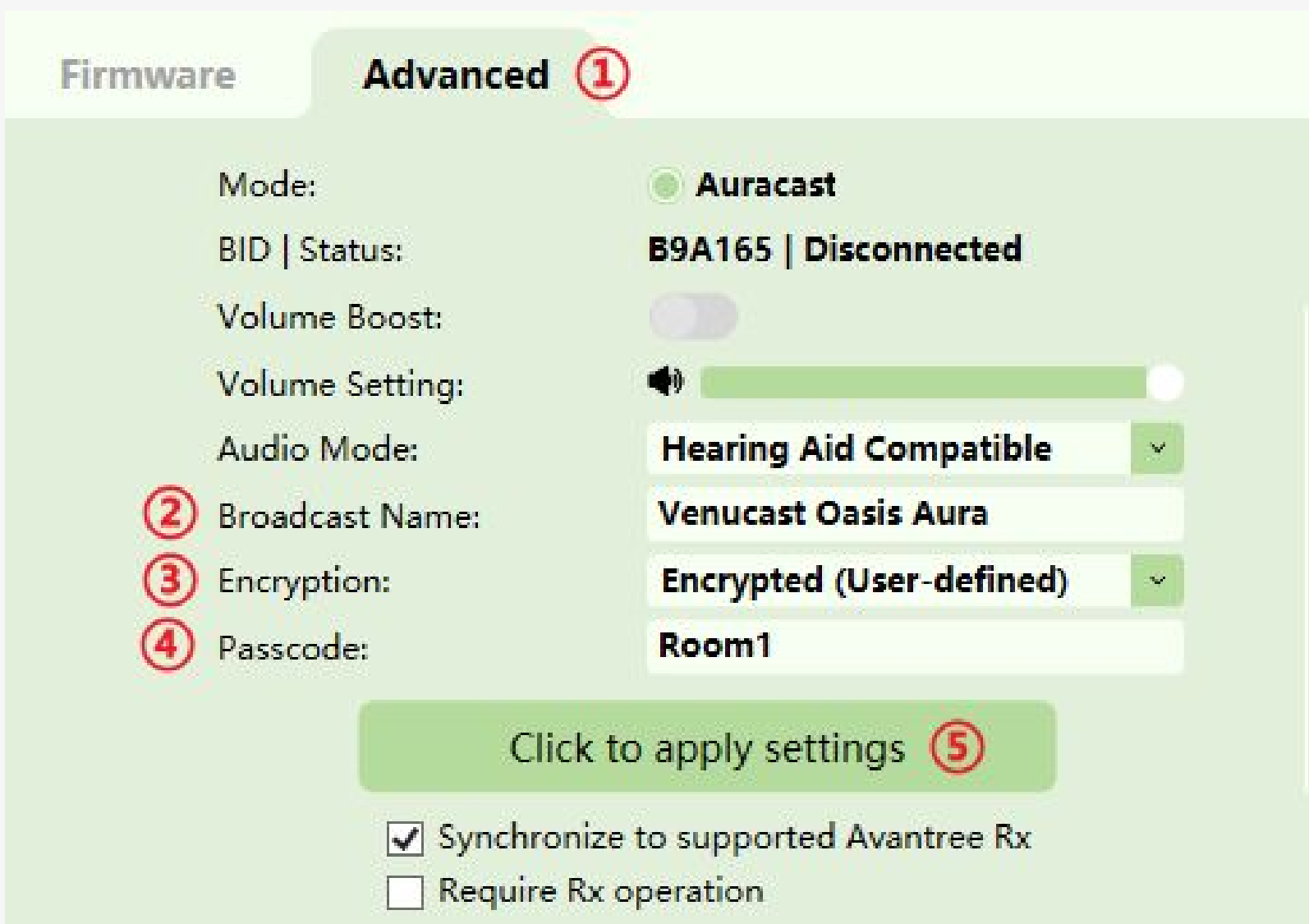

Suivant

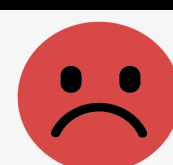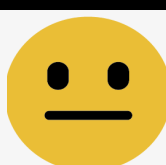

4.2 Changer de diffusion (Récepteur)

Le récepteur rejoint automatiquement la diffusion la plus forte au démarrage.

Stocke **jusqu'à 3** diffusions par session

Comment changer

Maintenez le **MFB** pendant 3s

État du LED



Clignotement orange → changement

Orange fixe → connecté



Si le groupe est activé, le récepteur est verrouillé à un transmetteur spécifique et ne peut pas changer de diffusion.

Suivant

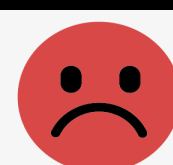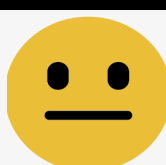

5. Alimentation & Charge

Utilisez le **chargeur inclus** et câble USB-C.

Émetteur



- Doit être branché pour fonctionner. (5V, 1-2,4A)

Récepteurs





- Utilisez le dock de charge
- Batterie faible : LED clignote **rouge**
- Charge : LED clignote **blanc**
- Complètement chargé : LED éteinte (~1,5 h)
- Autonomie : jusqu'à 16 h



[Contactez-nous](#) si vous avez besoin d'un adaptateur secteur supplémentaire.

Suivant

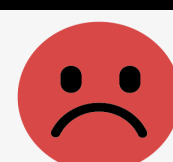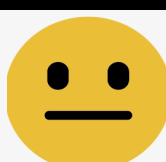

6. Boutons & Indicateurs



Transmetteur





- **LED d'entrée du transmetteur**

- A** • Solide → Signal valide
- AUX / OPT** • Clignotement → Pas de signal

- B** • Solide → Connecté à la source audio Bluetooth
- Téléphone** • Clignotement rouge & bleu → Mode de jumelage

- **Interrupteur d'entrée :**  • Audio Bluetooth
-  • Entrée OPT/AUX

Suivant

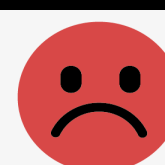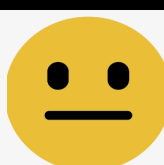

7. FAQ

Problèmes courants



- Délai audio
- Clarté des aides auditives



Besoin d'aide ?

[Contactez le support](#) ↗

Suivant

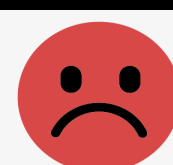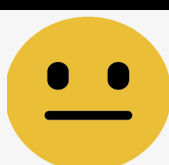

8. Conseils de déploiement



8.1 Signalisation

Utilisez la signalisation pour aider les utilisateurs à trouver rapidement et à rejoindre votre diffusion Auracast.

Placez des panneaux aux entrées, dans les zones de sièges ou près des écrans.

→ [Télécharger la signalisation](#)

Suivant

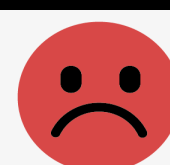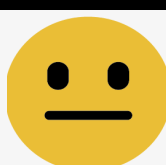



8.2 Couverture & Portée



- **Portée**

Garder l'émetteur et le récepteur à moins de 100 m / 328 pi (ligne de vue)

- **Source Bluetooth**

Garder votre téléphone près de l'émetteur (<30 pi /10 m)

Suivant

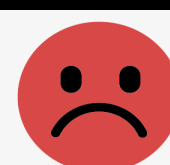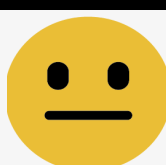



9. Ajouter un lieu sur la carte

Aidez les personnes à proximité à découvrir et à rejoindre votre diffusion Auracast.

Augmentez la visibilité pour :



Églises



Théâtres





Lieux publics

Les lieux listés peuvent être découverts via la carte Auracast.

→ [Ajoutez votre lieu](#)



Suivant

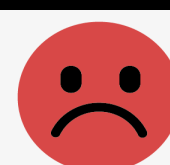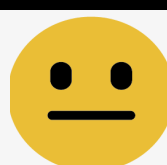

< Retour




Menu

Évaluez ce guide

Vos commentaires nous aident à améliorer ce guide pour tout le monde.

Cela ne prend qu'un instant.

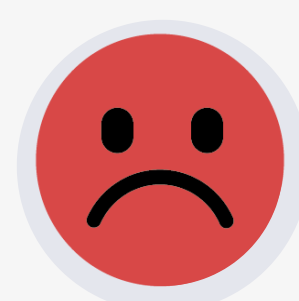

Suivant



10. Enregistrer & Support

Enregistrer votre produit

Extension de garantie & recevoir des mises à jour.

[Obtenir la garantie de 24M](#)

Besoin d'aide ? Contactez-nous



Email

support@venucast.com



Appeler



États-Unis (appel gratuit)

[+1 888 464 0168](#)



Autres régions



Chat

