

# **C82 Aura Transmitter for Hearing Aids**



## **Interattivo Guida di configurazione**

**Versione 1.5**


**Inizio configurazione**

< Indietro

# Menu Principale

1. Prima di Iniziare
2. Pulsanti & Indicatori
3. Apparecchi Acustici Compatibili
4. Usa con App
5. Usa con Telefono Samsung
6. Funzioni Avanzate
7. Registra il Tuo Prodotto
8. Assistenza con Operatore
9. Valuta questa Guida

Avanti

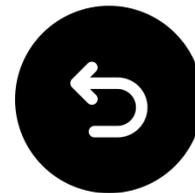


## 1. Prima di iniziare


- Dongle esclusivo Auracast  
(non per Bluetooth standard)
- Invia audio ai dispositivi Auracast
- Supporta apparecchi acustici  
→ [[Vedi dispositivi supportati](#)]
- Modalità predefinita:  
apparecchio acustico



## 2. Pulsanti & Indicatori

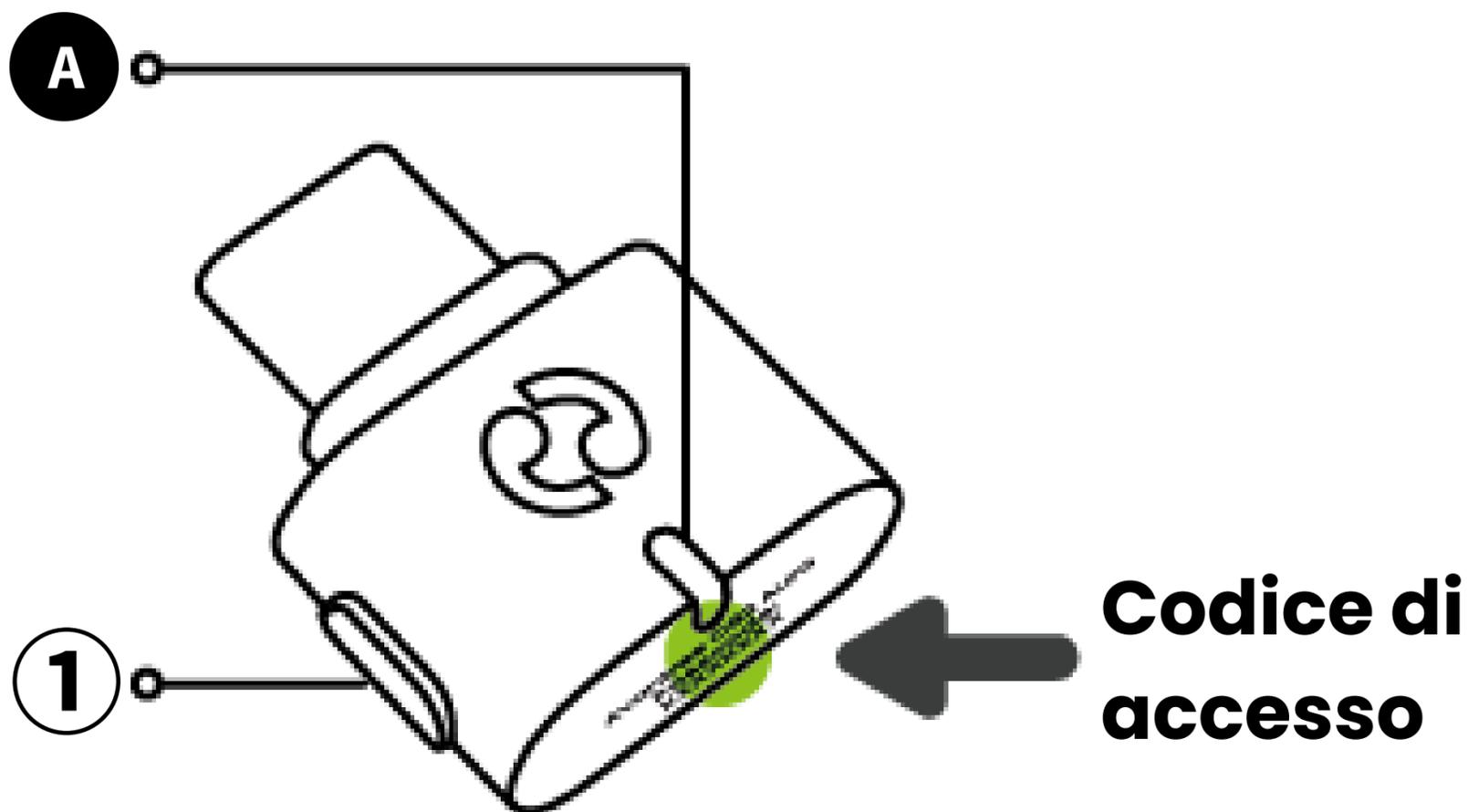

- Premi e tieni premuto ① MFB per 6s per cambiare modalità: → LED ● A :
  - **Bianco** = Apparecchio acustico
  - **Arancione** = HD
- LED acceso fisso = Trasmissione

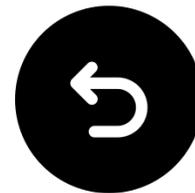


## 3. Dispositivi compatibili

### A. Auracast-Compatibile

Connessione tramite l'applicazione complementare del nostro airpod, o [un assistente Auracast \(ad esempio Samsung S24\)](#).

- ReSound Nexia,
- ReSound Vivid
- ReSound Savi
- Beltone Commence
- Beltone Envision
- Beltone Serene
- GN Danalogic Extend
- Jabra Enhance Pro 20
- Jabra Enhance Pro 30
- ...

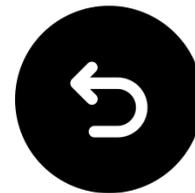

## 3. Dispositivi compatibili

### B. Auracast-Ready

Richiede [un assistente Auracast \(ad esempio Samsung S24\)](#) per connettersi

- Phonak Infinio Sphere 90
- Starkey Edge AI
- Oticon Intent
- Signia Charge Pure
- Signia Go IX
- Rexton Reach
- ...

#### **Nota:**

Il supporto dei dispositivi viene aggiornato regolarmente.  
Verifica [FAQ](#) per l'ultima lista.

Avanti

< Indietro

Torna al  
menu




## 4. Usare con l'app

1☒ Collegare C82 Aura e riprodurre l'audio.


2☒ Sull'app dell'udibile: go a **LE Audio /Auracast**.

3☒ Tocca **Aura\_XXXX**, quindi inserisci la password. → Sei pronto.

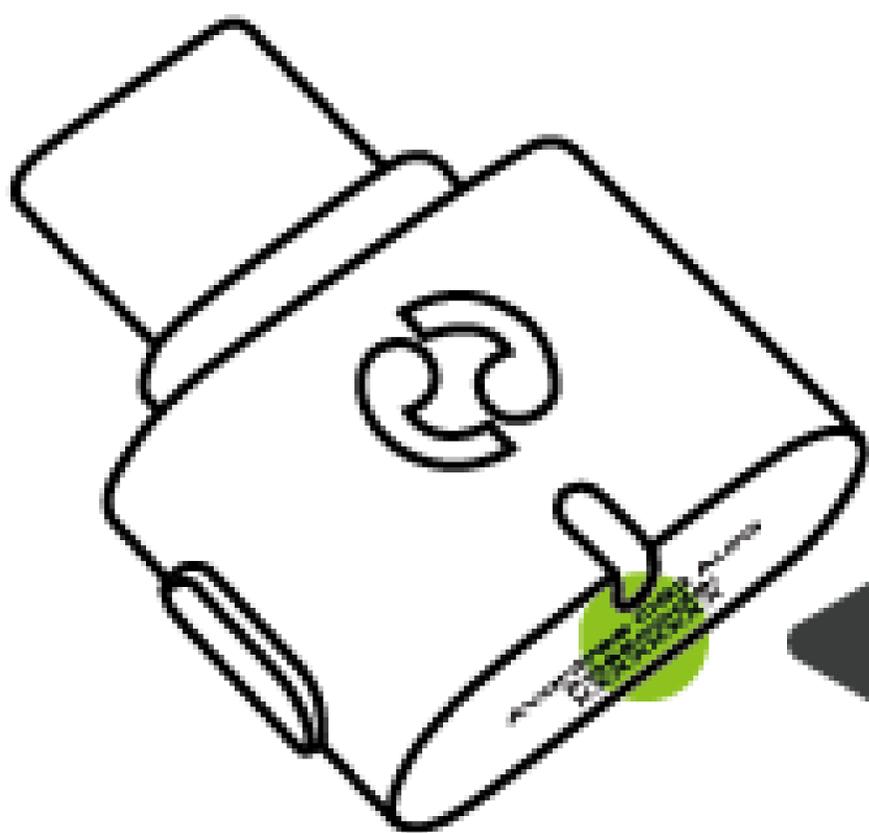

**Codice di  
accesso**

Avanti

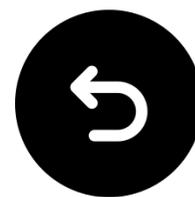

## 5. Utilizzo con telefono Samsung


1☒ Collega C82 Aura e riproduci audio.

2☒ Attiva Bluetooth e scegli le tue protesi acustiche.

3☒ Tocca  e attiva **LE Audio**.

4☒ Tocca **Ascolta la trasmissione Auracast > Aura\_XXXX**.

5☒ Inserisci la password. → Sei pronto.

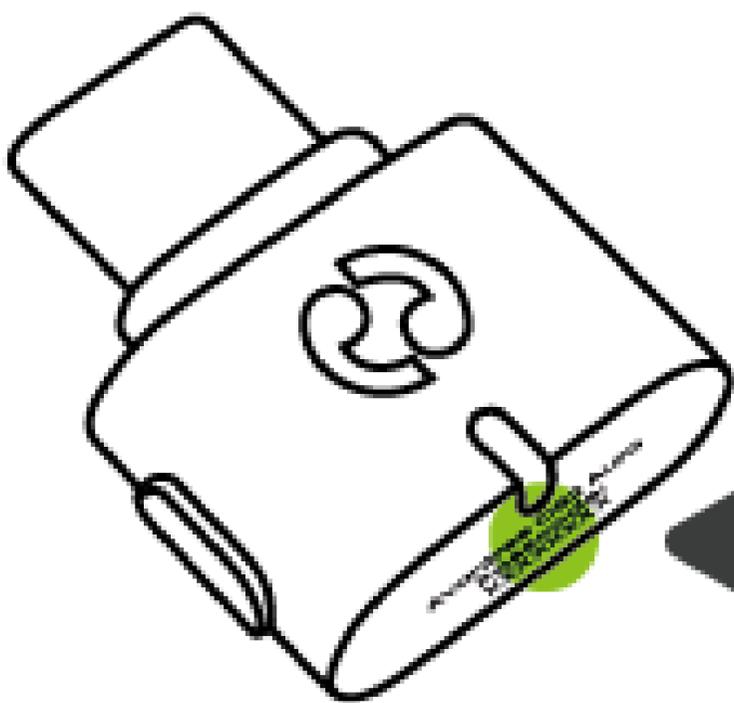


**Codice di  
accesso**

[Trova alternative al telefono Samsung ↗](#)

Avanti

< Indietro

Torna al  
menu

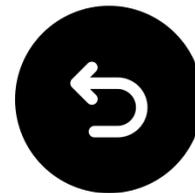

## 6. Funzionalità avanzate

### 6.1 Aggiornamento firmware

1☒ Scarica [Aggiornamento Avantree](#) sul tuo PC.

2☒ Collega C82 Aura.


3☒ Installa e avvia l'app.

4☒ Segui i passaggi dell'app.

Avanti

< Indietro

Torna al  
menu

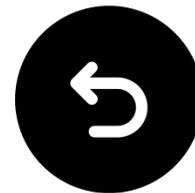

## 6. Funzionalità avanzate

### 6.2 Configurazione modalità HD


C82 Aura supporta l'audio HD con cuffie Auracast come [Avantree Infinity](#).

[Contattaci](#) per le istruzioni di configurazione.

Avanti

< Indietro

Torna al  
menu

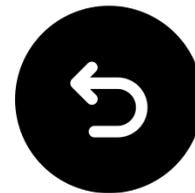

## 7. Registra il tuo prodotto

Registrati ora per:

- Ricevi notifiche sugli [aggiornamenti del firmware](#).
- Estendi la garanzia a 24 mesi—  
GRATIS.
- Goditi un supporto di assistenza  
prioritario.

[Registrati ora](#) ↗

Sei pronto

< Indietro

Torna al  
menu



## 8. Assistenza con agente live

Risponderemo entro **1 giorno lavorativo**

Opzioni di supporto rapido:

☒ Email: [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)


☒ [Programma richiamata ↗](#)

☒ [Invia una richiesta ↗](#)

☒ [Chat dal vivo ↗](#)

< Indietro

Torna al  
Menu

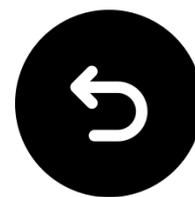

## 9. Valuta questa guida

Grazie per aver scelto C82 Aura!

Speriamo che questa guida ti abbia aiutato a iniziare.

La tua valutazione rapida ci aiuta a migliorare:

