



DG60 Aura

USB-Transmitter für
Auracast-Hörgeräte



Interaktiver Benutzer Leitfaden

Version 1.8

Setup starten

< Zurück



Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen
2. Schaltflächen & Anzeigen
3. Mit PC verbinden
4. Mit Gerät verbinden
 - 4A. Auracast-Geräte
 - 4B. Bluetooth-Kopfhörer
5. FAQ & Fehlerbehebung
6. Support & Feedback

Weiter

1. Bevor Sie beginnen

DG60 Aura ist ein USB-Audioübertragungsgerät.

Es unterstützt **Bluetooth** und **Auracast™**-drahtloses Streaming.


1. Funktioniert mit allen Bluetooth-Kopfhörern/-Ohrhörern.
2. Streamt auf Auracast™-Hörgeräte & Geräte. [Kompatibilitätsprüfer](#) ↗
3. Kein Treiber erforderlich.
4. Unterstützt **Windows-PC** und **Mac**.

[Weiter](#)

2. Tasten & Anzeigen

Modus-Schalter

Auracast

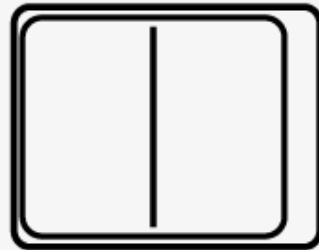

- Schieben Sie zu  → Bluetooth-Modus
- Schieben Sie zu  → Auracast-Modus

MFB-Taste

MFB

- **Bluetooth-Modus:** 3s halten →
Kopplung eingeben →  + • blinken
- **Auracast-Modus:** Doppelklick →
Umschalten
(• = Hörgeräte /  = Standard)

 [Vollständiger Tasten- & Anzeigenführer](#)

Weiter

3.1 Zusammenstellen & Verbinden


- ➊ Antenne am Dongle befestigen.
- ➋ In den PC einstecken.



3.2 Als Audioausgabe auswählen

1 Öffnen Sie **Sound-Einstellungen** auf Ihrem PC.

- **Windows:** Einstellungen → System → Ton

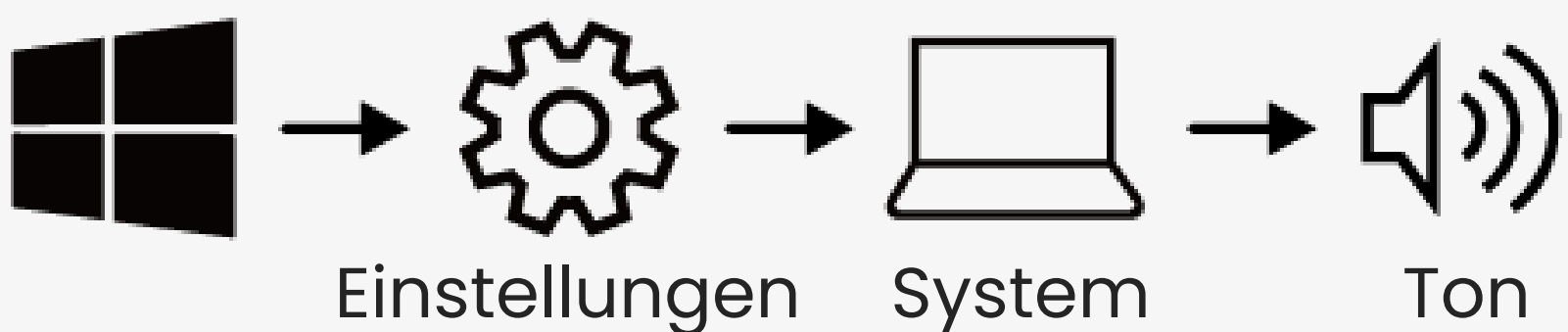

- **Mac:** Systemeinstellungen → Ton



2 Wählen Sie Avantree DG60 Aura als **Standardausgabe**.



4. Mit Gerät verbinden

Wählen Sie, wie Sie
DG60 Aura verwenden möchten:

A



Auracast-Geräte

→ Verbinden Sie Auracast-fähige
Hörgeräte oder Lautsprecher

B




Bluetooth-Kopfhörer


→ Verbinden Sie Ihre Bluetooth
Kopfhörer / Lautsprecher

4B.1 Telefon-Bluetooth ausschalten

Telefon-Bluetooth ausschalten um automatische Wiederverbindung und Kopplungsprobleme zu vermeiden

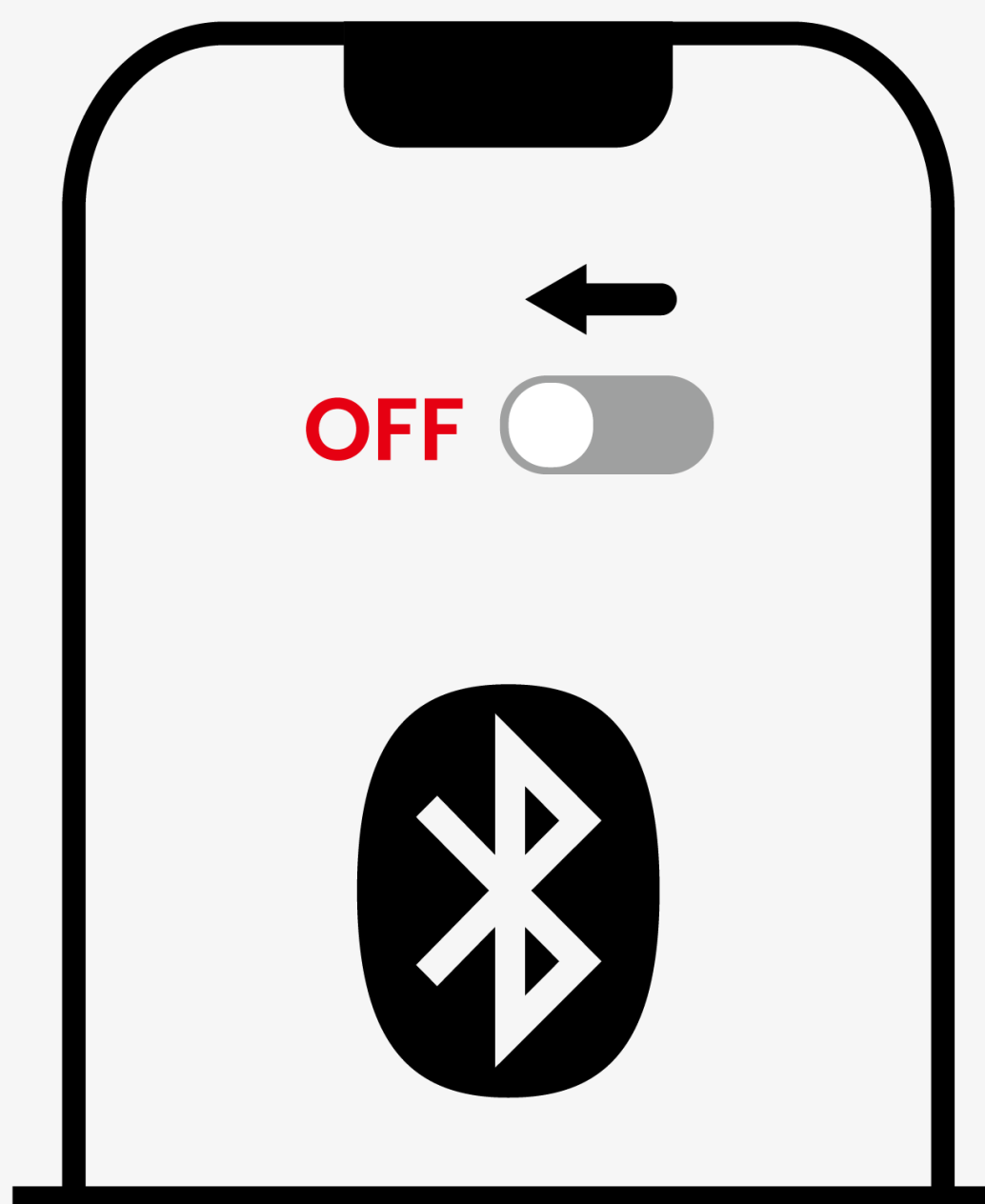[Weiter](#)

4B.2 Bluetooth-Kopplung eingeben

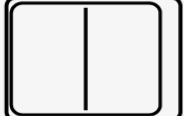- Schieben   zu 
- LED blinkt **blau** & weiß → Kopplungsmodus.




 Wenn LED nicht blinkt **blau** & weiß, **drücken & halten** MFB, bis es tut.

Weiter

4B.3 Kopfhörer in den Pairing-Modus versetzen

- Kopfhörer **müssen im Pairing-Modus sein.**
- Normalerweise, drücken & halten Sie die Haupttaste, bis das Licht **blinkt.**

Beispiel: AirPods Pro Pairing-Moduse

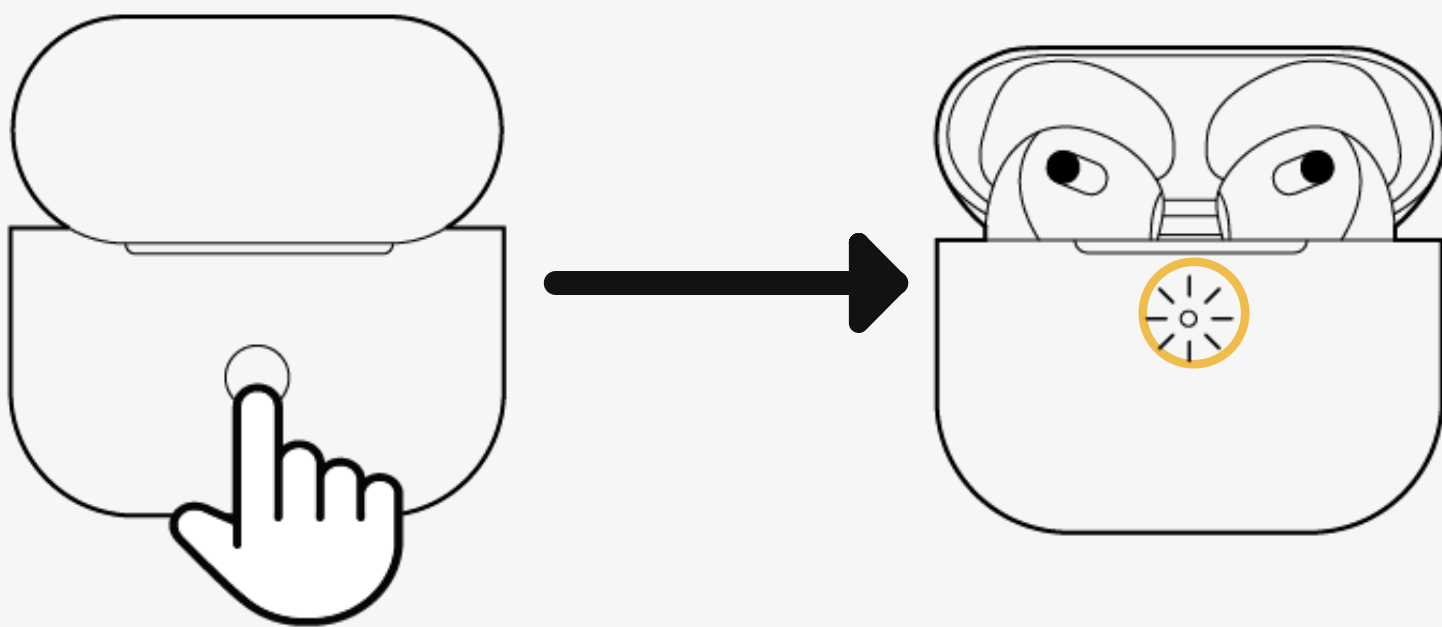

 Die meisten Fehler treten auf, wenn Kopfhörer nicht im Pairing-Modus sind.

 Brauchen Sie Hilfe? Überprüfen Sie unsere [Kopfhörer-Pairing-Anleitung](#)

Bereit zum Pairen

4B.4 Verbinden & Abspielen

❶ Kopfhörer in die Nähe des Senders legen.

✓ Verbunden: LED leuchtet **durchgehend blau**

❷ Audio abspielen → Audio über Kopfhörer genießen.



👉 [Schlechter Ton?](#)

Weiter

4B.5 Sprechen (Optional)

Um das Mikrofon zu verwenden, setzen Sie **Eingabegerät** → DG60 Aura

❶ Auf Ihrem PC:

- **Windows:** Einstellungen → System → Sound → Eingabe → DG60 Aura
- **Mac:** Systemeinstellungen → Ton → Eingabe → DG60 Aura

❷ In Ihrer Anruf-App (Zoom / Teams / Skype):

- Wählen Sie **DG60 Aura** für Mikrofon & Lautsprecher

 Im Anrufmodus, **LED = Weißes Dauerlicht**

 [Verwendung mit Auracast-Gerät?](#)



Der Auracast-Modus unterstützt kein Mikrofon Sprechen.

Weiter


4A.1 Auracast Muss Wissen

1. **Neue Technik** – Nur die neuesten Geräte unterstützen Auracast.
[Hier prüfen](#) ↗
2. **Hörgeräte** – "Auracast-ready" ≠ aktiviert. Nur aktives Auracast funktioniert
3. **Verbindung** – Benötigt einen Assistenten: Geräte-App oder Android/Google Auracast-Assistent.



Wichtig: Auracast-Geräte benötigen entweder eine App/Assistenz oder den neuen Android/Auracast-Assistent, um Sendekanäle zu finden

4A.2 Starten der Übertragung

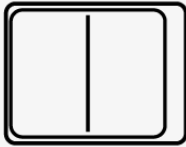1 Folie    → 

2 Doppelklick  → Wechseln zwischen

- • Weiß → Auracast-Hörgeräte
-  Orange → Auracast-Kopfhörer/Lautsprecher



Weiter

Wählen Sie den Auracast-Assistenten

Ihr Gerät benötigt einen Auracast-Assistenten, um Übertragungen zu finden.

- Einige verwenden **ihre eigene App** (z.B. ReSound).
- Andere verlassen sich auf den **Android Auracast-Assistenten** (z.B. Starkey).

Jetzt wählen Sie Ihre Einrichtung:




Verwenden Sie Ihre **Hörgerät-App**



Verwenden Sie Ihre **Hörgerät-App** oder den **Android Auracast-Assistenten** (Android 15+)

4A.3a iPhone- Benutzereinrichtung

- ➊ Gerät per Bluetooth mit dem Telefon koppeln.
- ➋ Öffnen Sie die App des Geräteherstellers:
Einschalten **Aurcast-Assistent** →
Broadcast finden → **DG60 Aura**.
- ➌ Audio abspielen → Mit Auracast-Gerät genießen.

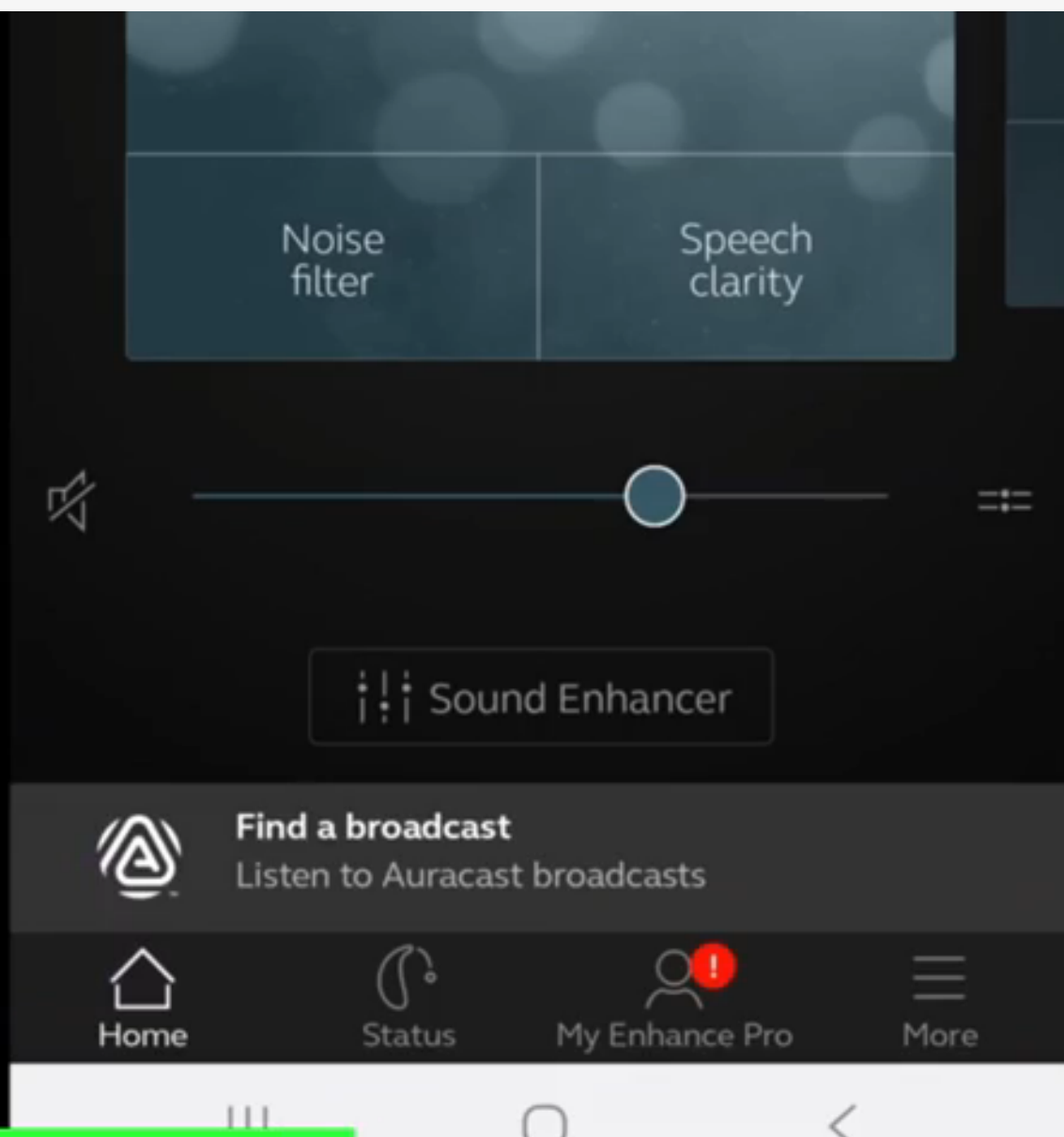


 iOS unterstützt Auracast nicht nativ. Sie müssen die App Ihres Geräts, den Auracast-Assistenten, verwenden.

Weiter

4A.3b Android-Telefon Benutzereinstellungen

- ➊ Koppeln Sie Ihr Gerät per Bluetooth mit dem Telefon.
- ➋ Aktivieren Sie LE Audio auf dem Telefon → Tippen Sie auf **Hören Sie sich die Auracast-Übertragung an → DG60 Aura.**
- ➌ Audio abspielen → Mit dem Auracast-Gerät genießen.

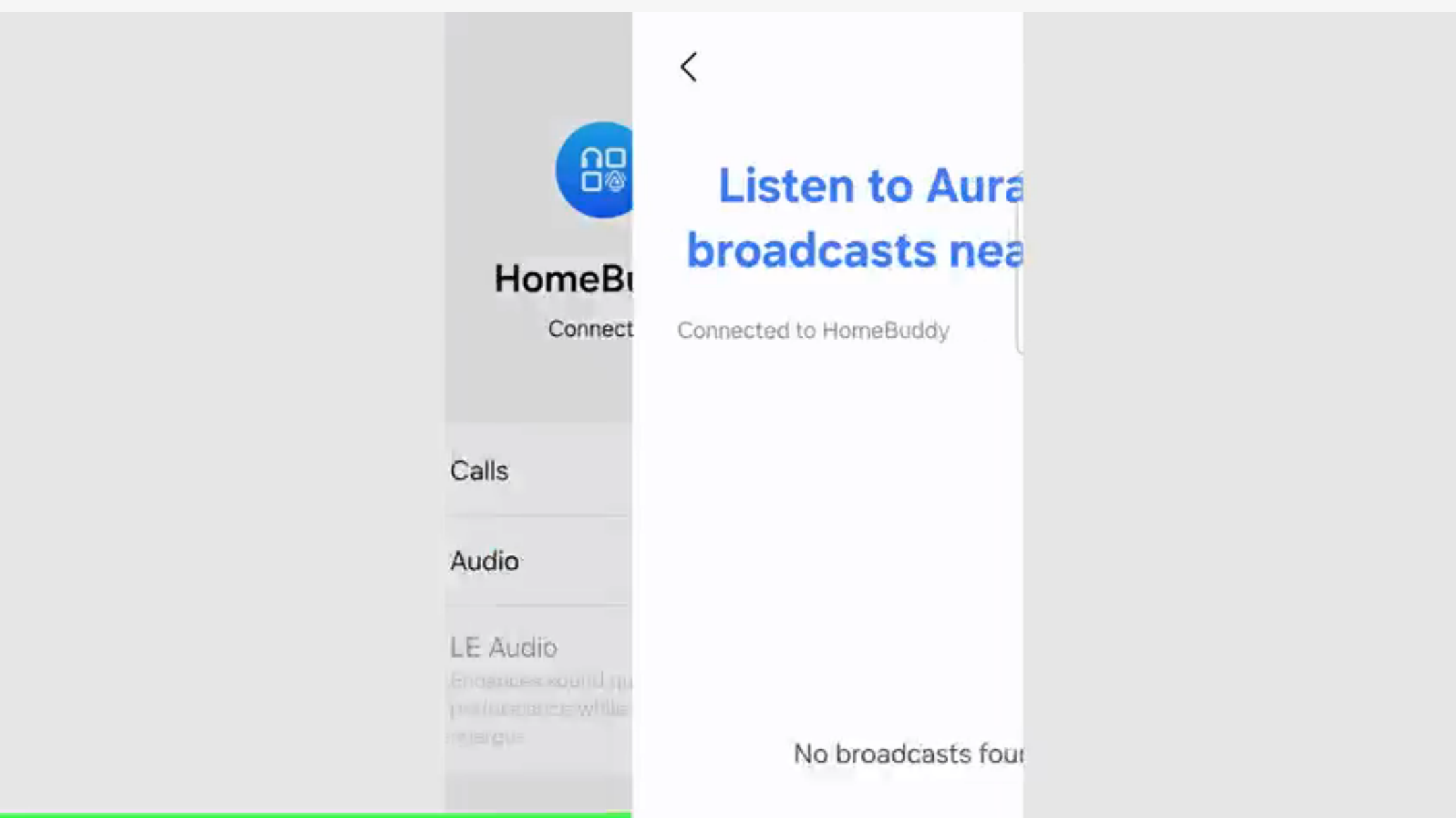

🔗 [Finden Sie ein Telefon mit Auracast-Assistenten-Unterstützung.](#) (z. B. Samsung S23+, Pixel 8/9)

Weiter



4A.4 Stabile Verbindung

- Telefon-Bluetooth **ausschalten**, nachdem die Hörgeräte verbunden sind
- Verhindert, dass Telefonsignale Auracast stören.



Mikrofonnotiz

- Der Auracast-Modus unterstützt kein Mikrofon.
- Für Gespräche [verwenden Sie ein Bluetooth-Headset](#) ↗

Weiter

5. FAQ & Fehlerbehebung

Hier sind einige häufig gestellte Fragen:

- [Nicht koppeln? ↗](#)
- [Schlechter Ton? ↗](#)
- [Mikrofon funktioniert nicht? ↗](#)
- [Funktionieren Sony WH-1000XM5/XM6? ↗](#)
- [Wie lösche / setze die
Kopplungshistorie zurück? ↗](#)

 [Weitere FAQ & Fehlerbehebung ↗](#)

Weiter

7. Support & Feedback

1. Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

Registrieren Sie Ihr Produkt

2. Agentensupport

Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie unsere Agenten.



E-Mail



Anrufen



Chat

3. Feedback teilen

Wie fühlen Sie sich in Bezug auf diesen Leitfaden?



Schlecht



Okay



Gut