



DG60 Aura

Émetteur USB pour
Aides auditives Auracast



Guide Utilisateur Interactif Guide

Version 1.8

Démarrer la configuration

< Retour



Menu Principal

1. Avant de commencer
2. Boutons & Indicateurs
3. Connecter au PC
4. Connecter avec l'appareil
 - 4A. Appareils Auracast
 - 4B. Casques Bluetooth
5. FAQ & Dépannage
6. Support & Retour d'information

Suivant

1. Avant de commencer

DG60 Aura est un transmetteur audio USB.


Il supporte **Bluetooth** et le streaming sans fil **Auracast™**.

1. Compatible avec tous les casques/buds Bluetooth.
2. Diffuse vers les appareils auditifs & appareils Auracast™.
[Vérificateur de compatibilité](#) ↗
3. Aucun pilote requis.
4. Supporte **Windows PC** et **Mac**.

[Suivant](#)

2. Boutons & Indicateurs

Interrupteur de mode

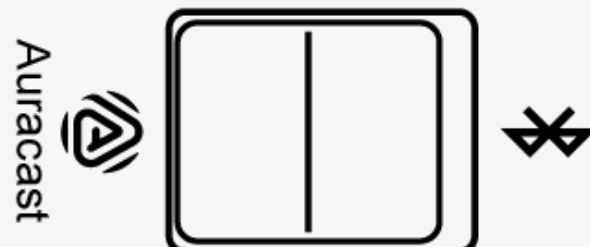

- Faites glisser  → Mode Bluetooth
- Faites glisser  → Mode Auracast

Bouton MFB



- **Mode Bluetooth** : Maintenir 3s → Entrer en appairage → clignotement  + .
- **Mode Auracast** : Double clic → Changer ( = Appareils auditifs /  = Standard)

 [Guide complet des boutons & indicateurs](#)

Suivant

3.1 Assembler & Connecter


- ❶ Fixer l'antenne au dongle.
- ❷ Brancher à l'ordinateur.




3.2 Sélectionner comme sortie audio

1 Ouvrez **Paramètres du son** sur votre PC.

- **Windows** : Paramètres → Système → Son

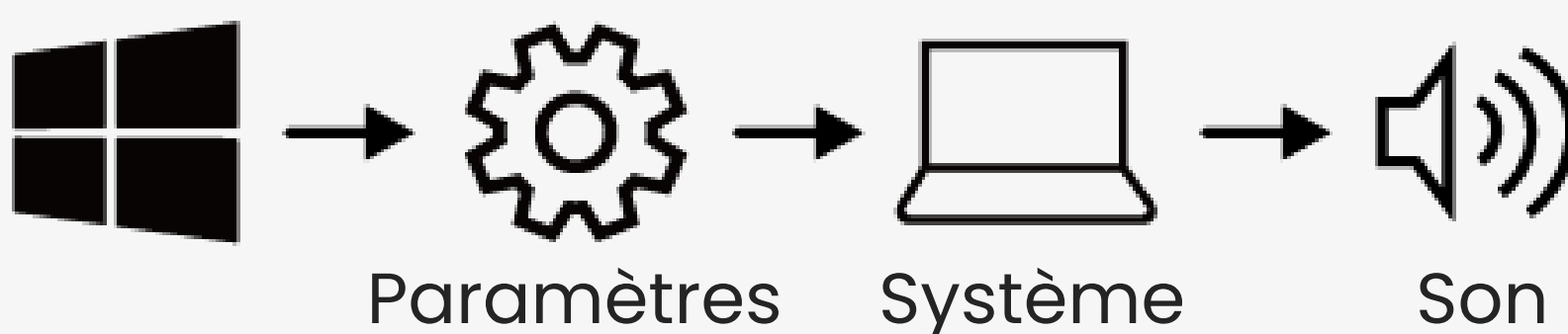

- **Mac** : Paramètres Système → Son

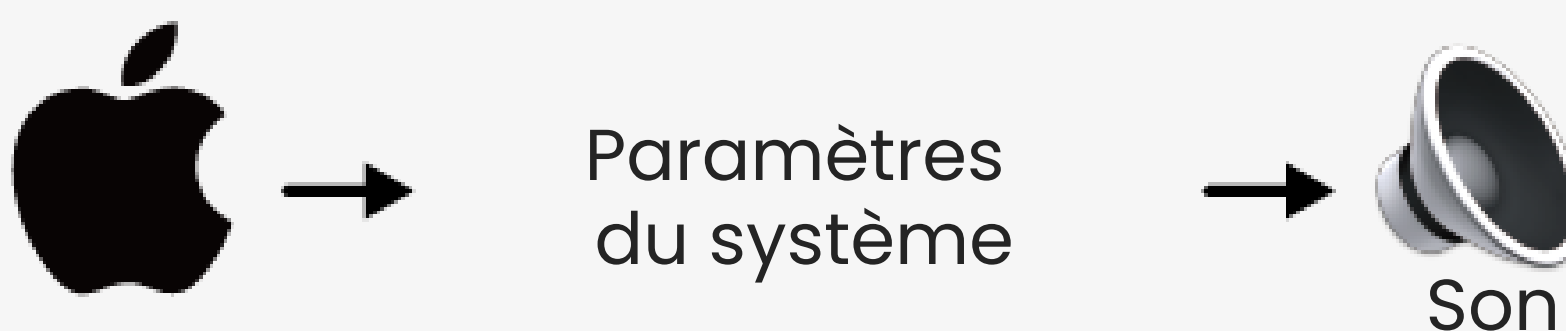

2 Choisissez Avantree DG60 Aura comme **sortie par défaut**.

Suivant



4. Se connecter avec l'appareil

Choisissez comment vous souhaitez utiliser DG60 Aura :

A



[Appareils Auracast](#)

→ Se connecter à des aides auditives ou enceintes prêtes pour l'Auracast.

B




[Casque Bluetooth](#)


→ Connectez-vous à vos écouteurs / haut-parleurs Bluetooth

4B.1 Désactiver le Bluetooth du téléphone

Désactivez le Bluetooth du téléphone pour éviter la reconnexion automatique et les problèmes d'appairage

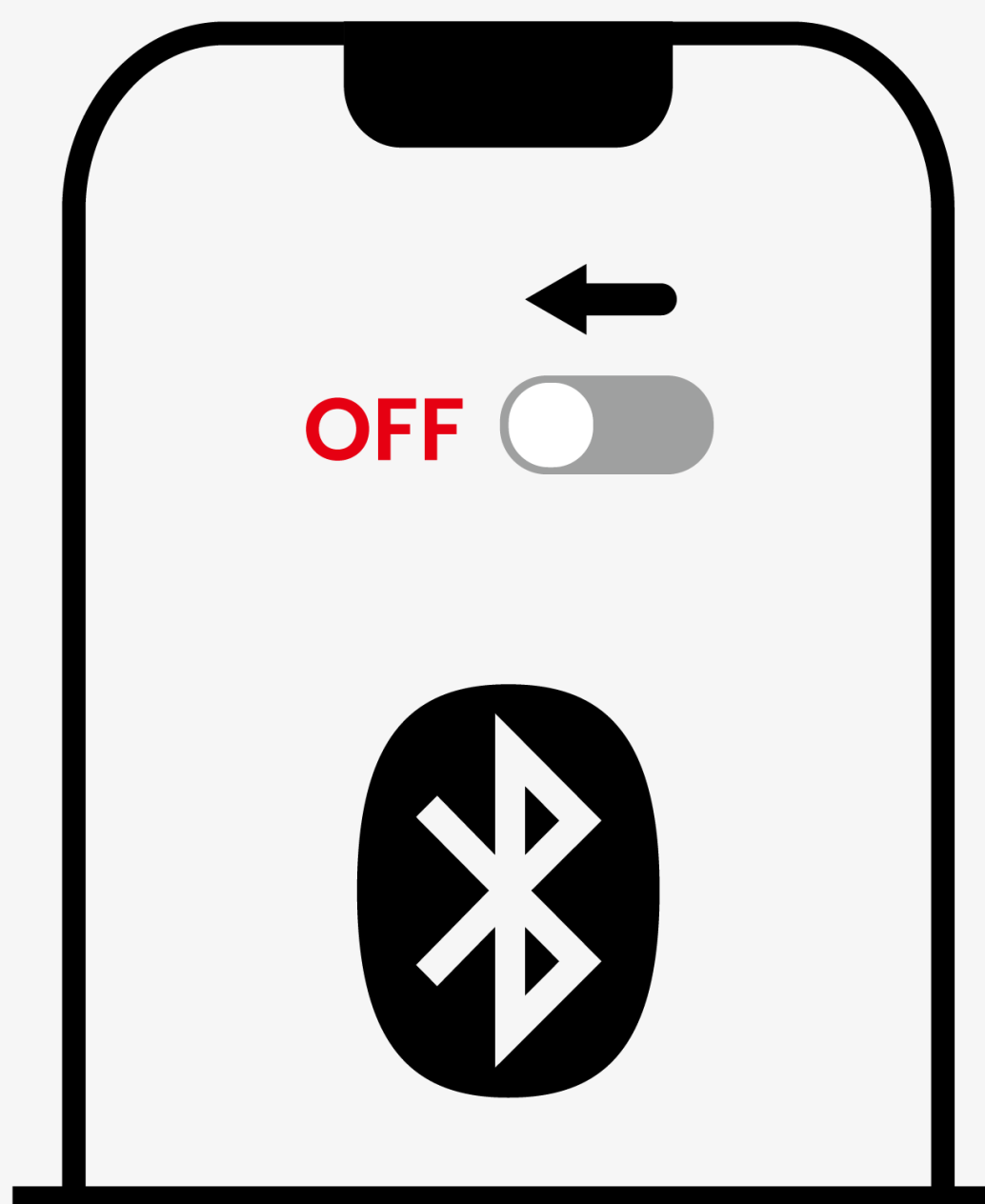

4B.2 Entrer en appairage Bluetooth

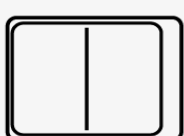- Faites glisser   pour 
- L'LED clignote **bleu** & blanc → Mode appairage.




 Si l'LED ne clignote pas **bleu** & blanc, **appuyez & maintenez** MFB jusqu'à ce qu'elle le fasse.

Suivant

4B.3 Mettre les écouteurs en mode appairage

- Les écouteurs **doivent être en mode appairage.**
- En général, appuyez & maintenez le bouton principal jusqu'à ce que la lumière **clignote.**

Exemple : mode d'appairage AirPods Pro

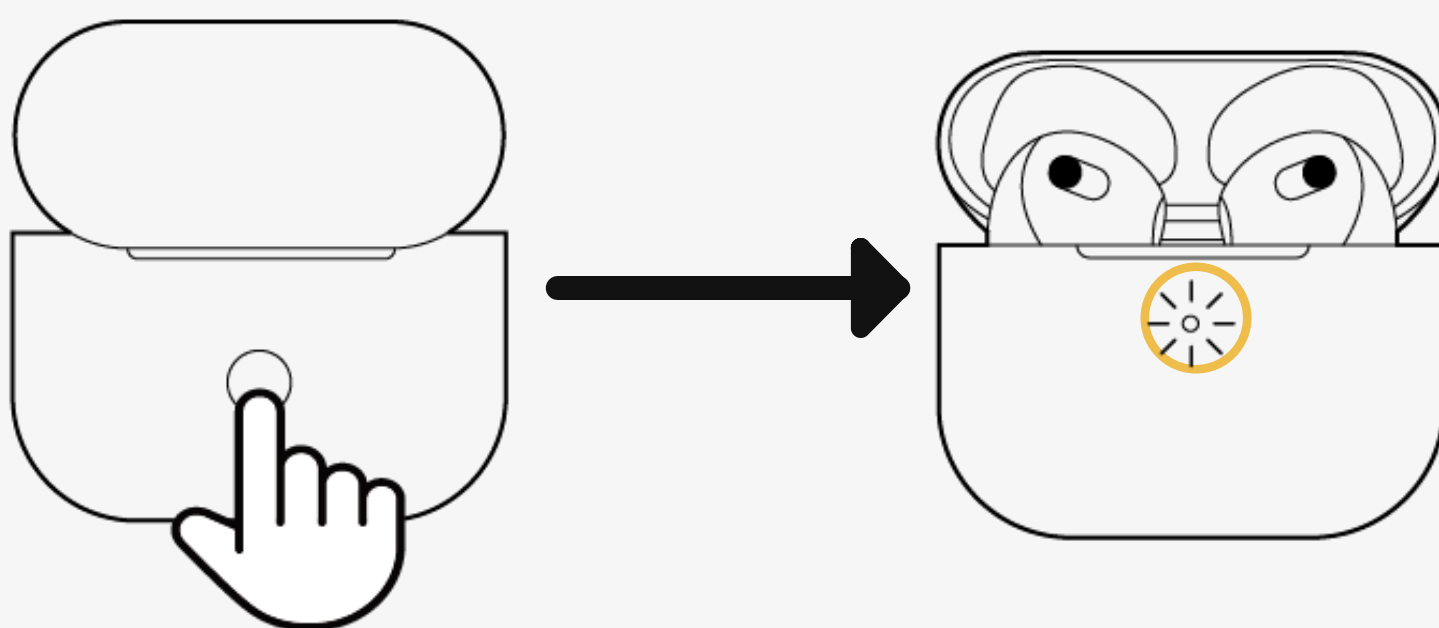

 La plupart des échecs se produisent lorsque les écouteurs ne sont pas en mode appairage.

 Besoin d'aide ? Consultez notre [Guide d'appairage des écouteurs](#)

Prêt à appairer

4B.4 Connecter & Jouer

❶ Approchez les écouteurs du transmetteur.

✓ Connecté : la LED devient **fixe bleu**

❷ Jouer l'audio → Écoutez l'audio via les écouteurs.



👉 [Son médiocre ?](#)

Suivant

4B.5 Parler (Optionnel)

Pour utiliser le micro, configurez
Périphérique d'entrée → DG60 Aura

1 Sur votre PC :

- **Windows** : Paramètres → Système → Son → Entrée → DG60 Aura
- **Mac** : Paramètres Système → Son → Entrée → DG60 Aura

2 Dans votre application d'appel
(Zoom / Teams / Skype) :

- Sélectionnez **DG60 Aura** pour le micro et les haut-parleurs

 En mode appel, **LED = Blanc fixe**

 [Utilisation avec appareil Auracast ?](#)

 Le mode Auracast ne supporte pas le micro parler.

Suivant

4A.1 Connaître Auracast

1. **Nouvelles Technologies** – Seuls les appareils les plus récents prennent en charge Auracast.

[Vérifiez ici](#) ↗

2. **Appareils auditifs** – "Prêts pour Auracast" ≠ activé. Seul Auracast actif fonctionne
3. **Connexion** – Nécessite un assistant : application pour appareil ou assistant Android/Google Auracast.



Important : Les appareils Auracast doivent utiliser une application/assistant ou le nouvel assistant Android Auracast pour trouver les canaux de diffusion

Suivant

4A.2 Démarrer la diffusion

❶ Diapositive



❷ Double clic



→ Switch entre

- blanc → Auralcast Audífonos
-  naranja → Auracast cascos/altavoces



Suivant

Choisir l'assistant Auracast

Votre appareil a besoin d'un Assistant Auracast pour trouver les diffusions.

- Certains utilisent **leur propre application** (par exemple ReSound).
- Certains comptent sur l'**Assistant Auracast Android** (par exemple Starkey).

Maintenant, choisissez votre configuration :




Utilisez l'**application de votre appareil auditif**



Utilisez votre **application d'appareil auditif** ou l'**Assistant Auracast Android** (Android 15+)

4A.3a Configuration pour l'utilisateur iPhone

- ➊ Appairez votre appareil avec le téléphone via Bluetooth.
- ➋ Ouvrez l'application du fabricant de l'appareil : Activez **l'assistant Auracast** → Rechercher une diffusion → **DG60 Aura**.
- ➌ Lire l'audio → Profitez avec l'appareil Auracast.

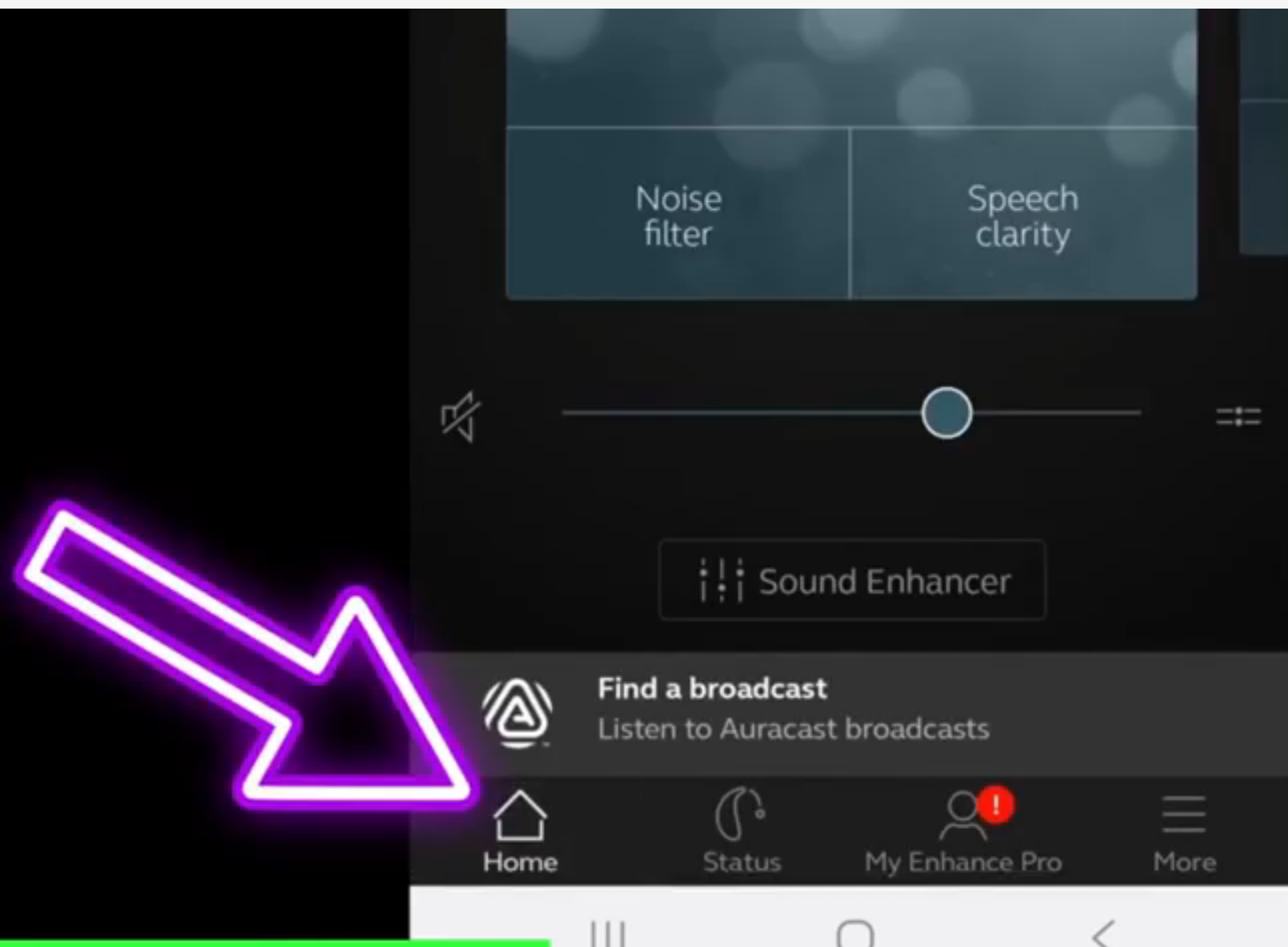


 iOS ne gère pas nativement l'Auracast. Utilisez l'application Assistant Auracast de votre appareil.

[Suivant](#)

4A.3b Téléphone Android

Configuration de l'utilisateur

- ➊ Appairez votre appareil avec le téléphone via Bluetooth.
- ➋ Allumez LE Audio sur le téléphone → appuyez sur **Écouter la diffusion Auracast** → **DG60 Aura**.
- ➌ Lire l'audio → Profitez avec le dispositif Auracast.

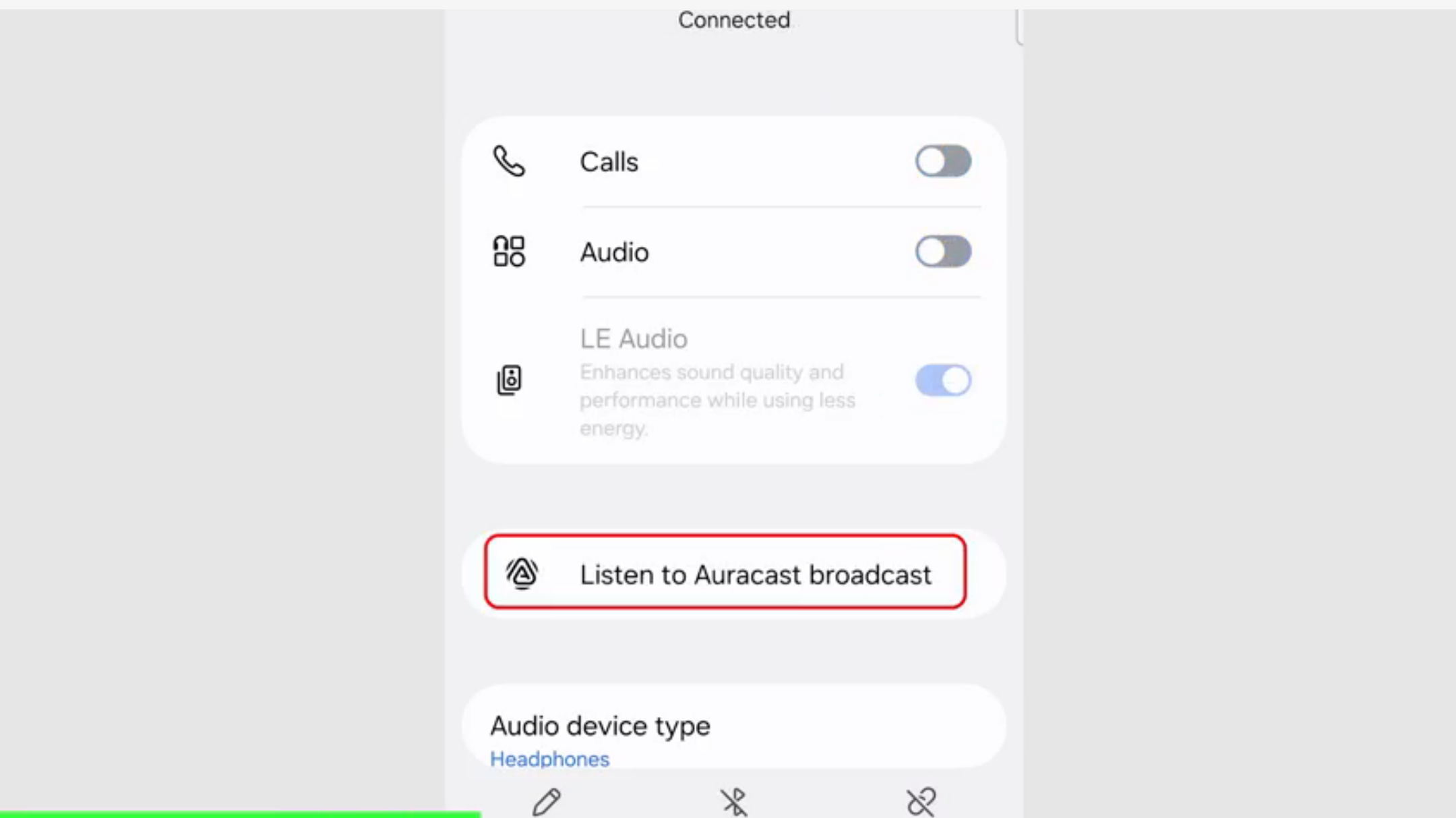

👉 [Trouver un téléphone avec support d'assistant Auracast.](#) (par exemple Samsung S23+, Pixel 8/9)

Suivant

4A.4 Connexion stable

- Éteignez le Bluetooth du téléphone **après** la connexion des aides auditives
- Empêche les signaux du téléphone de perturber Auracast.



Note micro

- Le mode Auracast ne supporte pas le microphone.
- Pour parler, [utilisez un casque Bluetooth](#) ↗

[Suivant](#)

5. FAQ & Dépannage

Voici quelques questions fréquentes :

- [Ne pas coupler ? ↗](#)
- [Son poor ? ↗](#)
- [Microphone ne fonctionne pas ? ↗](#)
- [Les Sony WH-1000XM5/XM6 fonctionnent-ils ? ↗](#)
- [Comment réinitialiser / effacer l'historique de couplage ? ↗](#)

 [Plus de FAQ & Dépannage ↗](#)

Suivant

7. Support & Retour d'information

1. Enregistrez votre produit

Extension de garantie & recevoir des mises à jour.

Enregistrez votre produit

2. Support agent

Besoin d'aide ? Contactez nos agents.



Email



Appeler



Chat

3. Partager des commentaires

Comment trouvez-vous ce guide ?



Mauvais



D'accord



Bon