



AcuEar C1

Hilfende Ohrenhörer
Mit Rauschunterdrückung




Interaktiver Benutzer Leitfaden

Version 2.3.1



Ersteinrichtung

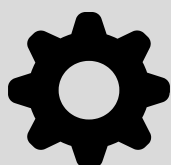

Fehlerbehebung

< Zurück



Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen
2. Beginn mit Verwendung der Ohrhörer
3. Tasten & Anzeigen
4. Strom & Laden
5. Fehlerbehebung
6. Support & Feedback

Weiter



1. Bevor Sie beginnen

Einfaches **Hörhilfen**

— kein Bluetooth, kein Hörgerät.

- Kein Bluetooth erforderlich
- Kein medizinisches Hörgerät
- Geeignet für leichte bis mäßige Hörverluste
- **Einfache Sprachverstärkung** für den täglichen Gebrauch
- **Geräuschreduzierung**-Modus für laute Orte
- Bis zu **50** Stunden Nutzung




Weiter

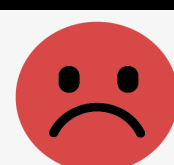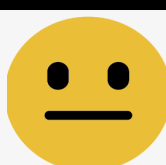

2. Beginn mit den Ohrhörern

2.1 Grundlegende Verwendung

Keine Einrichtung erforderlich,
einfach tragen und einschalten (MFB
2 Sekunden lang drücken & halten).

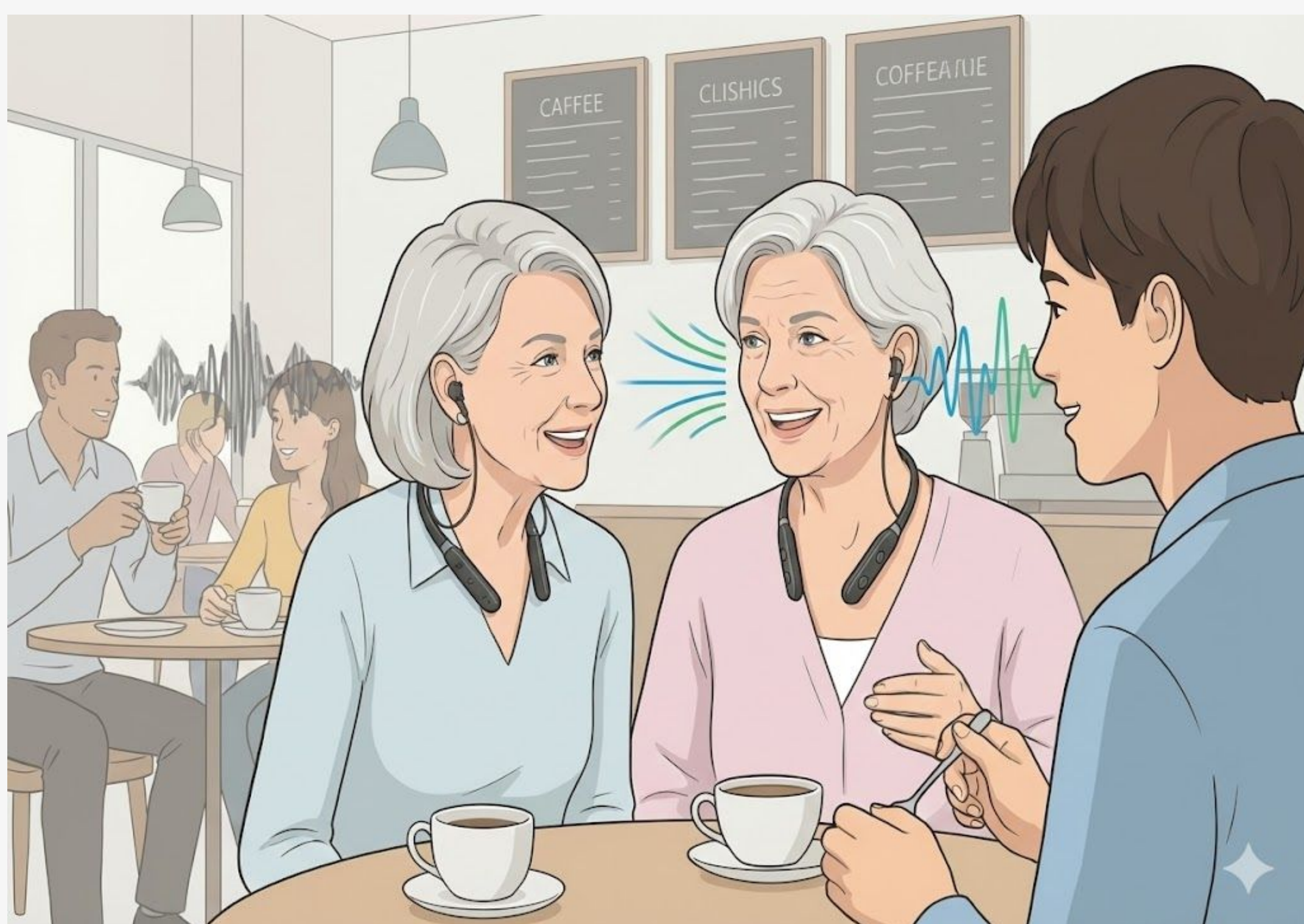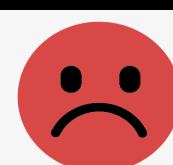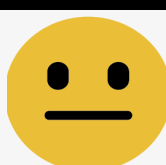[Weiter](#)

2.2 Einstellungen anpassen

- **Hörmodi (3)**

Drücken Sie die Modustaste, um die Modi zu wechseln:



- 1 Piepton – Normal
- 2 Pieptöne – Geräuschreduzierung 1
- 3 Pieptöne – Geräuschreduzierung 2

- **Anpassung der Verstärkung**

Drücken Sie **+** / **-** um die Lautstärke anzupassen.



Weiter

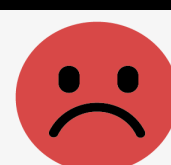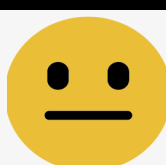

3. Tasten & Anzeigen



① MFB

Halten 2s: Einschalten/Ausschalten



② Modustaste

Drücken um durchzuschalten:

- Normal
- Geräuschreduzierung 1
- Geräuschreduzierung 2

 [Vollständiger Tasten- & Anzeigenführer](#)

Weiter

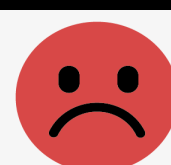
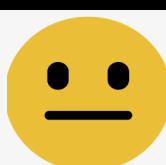


4. Stromversorgung & Laden

- Verwenden ein USB-C-Kabel (5V, 0,5A~2A)
- Vollständig aufgeladen: ~ 2,5 Std
- Spielzeit: Bis zu 50 Std



Weiter

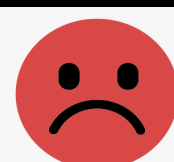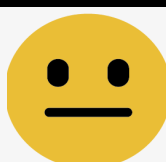

< Zurück




Menü

Bewerten Sie diesen Leitfaden

Ihr Feedback hilft uns, diesen Leitfaden für alle zu verbessern.

Es dauert nur einen Moment.

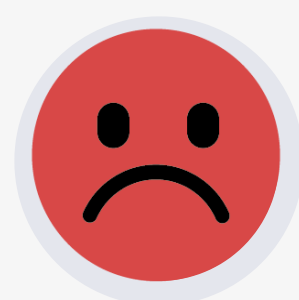

Weiter



5. Fehlerbehebung

Häufige Probleme

- Umgebungsgeräusche zu laut
- Pfiff



 [Weitere FAQ & Hilfe ↗](#)



Noch Hilfe benötigt?

[Support kontaktieren](#) ↗

Weiter

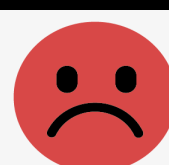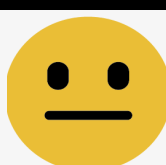



6. Support & Feedback

Agenten-Support

Brauchen Sie Hilfe? Wir sind hier.



E-Mail



Anrufen



Chat

Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

Erhalten Sie 24M Garantie

